

Liftera-V



Modelo	Liftera-V
Tipo de Produto	Ultrassom Microfocado de Alta Intensidade
Aplicador para Rosto	4MHz / 4,5 mm, 7MHz / 1,5, 3,0 mm
Aplicador para Corpo	4MHz / 7,0, 10,0, 13,0 mm
Frequência	1~10 Hz
Saída Ultrassônica	0.1~2.0 J (0.1J step)
LCD	8" Touch LCD
Dimensão (WxDxH)	300 x 330 x 200(mm)
Peso	5 kg
Alimentação de Entrada	AC 100~240V, 50/60Hz
Consumo	300 VA

Liftera



Importado por Entera Med.

CNPJ: 12.365.815/0001-53 | Registro ANVISA: 81961919001
Resp. Técnico: Augusto R. Oliveira | Nº Crea/SP:5070499733
TEL +55(16) 3902-3791 | E-mail: atendimento@entera.med.br

www.entera.med.br



2022. Todos os direitos reservados.

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Leia e compreenda o manual de instruções antes de utilizar o equipamento. As imagens são meramente ilustrativas. Este produto e suas partes são cobertos por uma ou mais patentes dos EUA e estrangeiras ou por aplicações com patentes pendentes.

Este é um produto médico. Material exclusivo para médicos, válido apenas para o Brasil.

Liftera

VISION

A liberdade de criar uma beleza única

Vivencie a tecnologia pioneira e patenteada da Caneta Liftera e surpreenda-se com os resultados incríveis que estão transformando os tratamentos dermatológicos.



Liftera

VISION

Conheça a mais inovadora e revolucionária tecnologia, que vai trazer **maior eficiência** para seus tratamentos, proporcionar uma **experiência única** e personalizada para seus pacientes e abrir novas oportunidades de **expansão** para a sua clínica.

Para médicos apaixonados por inovação, sem abrir mão do seu toque pessoal.



Liftera Vision realiza Tratamento por Difusão Térmica (**TDT™**) e por Unidade Digital de Potência (**UDP™**), em uma versão compacta, com a exclusiva tecnologia da Caneta Liftera. O **TDT™** permite a entrega e o acúmulo de calor em diferentes camadas da pele com velocidade de até 10Hz, promovendo um efeito térmico preciso e seguro nas fibras de colágeno. Já a **UDP™** controla digitalmente a forma como a energia é entregue nas camadas durante o tratamento, alcançando o ponto de coagulação ideal, o que aumenta a eficácia, a segurança e o conforto para doutores e pacientes.

Benefícios Liftera Vision



Protocolos individualizados



Uso combinado com outras tecnologias e tratamentos



Design inovador e ergonômico



Disparo digital



Tecnologia pioneira e patenteada



Potencializa outras tecnologias




Rápido retorno de investimento


Ofereça uma experiência única com resultados incríveis para seus pacientes!

Tratamentos para o rosto: promovendo o Lifting facial


Com Liftera Vision é possível tratar todas as regiões da face, como: fronte, pálpebras, rugas, lábios, queixo e contorno facial. A Caneta Liftera traz ainda melhor performance em regiões como pálpebra inferior (eliminando rugas, bolsas de gordura, flacidez), "jaw", papada, sulco nasogeniano, entre outras.

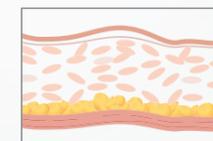


Pele flácida
Pele enrugada, flácida e sem elasticidade devido ao envelhecimento da derme superior e inferior (SMAS).

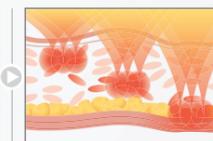

Como Liftera age na face
A Unidade Digital de Potência (UDP™) exclusiva do Liftera realiza pontos de coagulação (65°C) em alta velocidade (0,1 segundo), em diferentes profundidades.

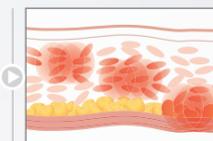


Reação do tecido após Liftera
Contração das diferentes camadas, retração tecidual, estímulo do colágeno existente e formação de novo colágeno (neocolagênese).

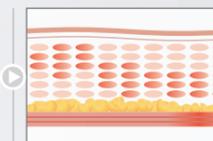


Eficácia do Liftera na face
Remoção de rugas, efeitos Lifting & Tightening através da remodelação do colágeno e produção de novo colágeno.

Tratamentos corporais: contorno e remodelação


Liftera Vision é eficaz em tratamentos para aumentar a firmeza da pele e melhorar o contorno corporal, eliminando tecidos adiposos do abdômen, braços, gordura pré-axilar, joelhos, interno de coxa, interno de braço, flancos, entre outras.

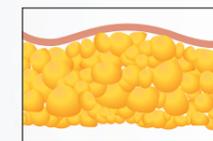


Gordura subcutânea
Células de gordura e celulite.

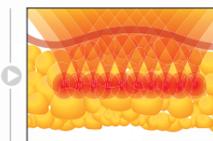

Como o Liftera atua no corpo
A tecnologia TDT™ atinge as células de gordura em diferentes profundidades.

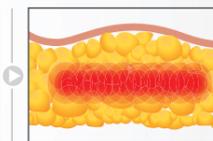

Reação do tecido após Liftera
O acúmulo de calor de maneira homogênea é mais eficiente para atingir um maior número de células de gordura, que serão reduzidas e absorvidas por uma grande quantidade de macrófagos.

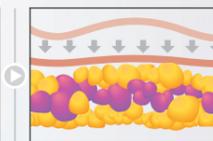

Eficácia do Liftera no corpo
Redução da flacidez, eliminação de células de gordura e remodelação do contorno corporal.