

Guia de Tratamento Facial



Liftera




Capítulo I

Protocolos por áreas de tratamiento




Transdutor em linha

Tratamento para Lifting facial com transdutor em linha

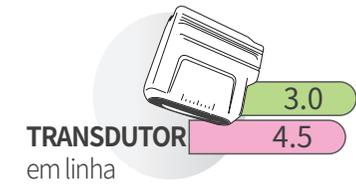


Como aplicar

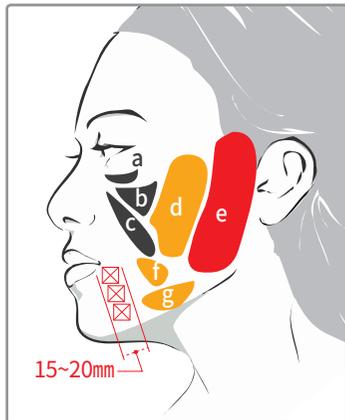

Compartimento superficial de gordura das bochechas

- a. Gordura infraorbital
- b. Gordura medial da bochecha
- c. Gordura nasolabial
- d. Gordura da bochecha
- e. Gordura da lateral da bochecha
- f. Gordura superior do jowl
- g. Gordura inferior do jowl

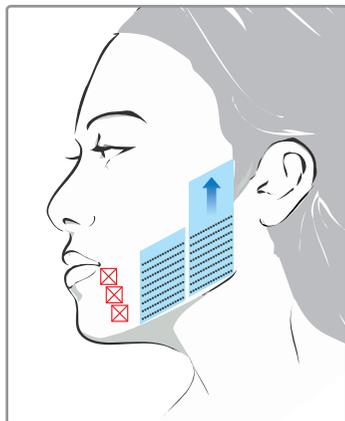

Após total contato e acoplamento do cartucho na pele na região lateral (bochecha), deve-se iniciar aplicação a ser feita no sentido de baixo (mandibular) para orelha.



Descrição

A aplicação deve ser feita nos dois lados da bochecha. A lateral da bochecha tem uma grande quantidade de tecido ligamentar, de modo que a aplicação das linhas deve ser feita no intervalo de 2-3mm em direção ao ouvido com o cartucho.

Atenção


1. Não aplicar abaixo da linha da boca ☒ porque é a localização do nervo.
2. Evite sobrepor a aplicação no mesmo local.
3. Concentrar-se no contato próximo do cartucho com a superfície da pele até que a formação da linha única seja feita durante a aplicação.

Caneta Liftera

Tratamento para Lifting facial com caneta Liftera





Como aplicar

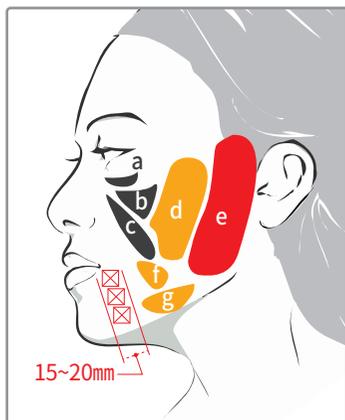

Compartimento superficial de gordura das bochechas

- a. Gordura infraorbital
- b. Gordura medial da bochecha
- c. Gordura nasolabial
- d. Gordura da bochecha
- e. Gordura da lateral da bochecha
- f. Gordura superior do jowl
- g. Gordura inferior do jowl

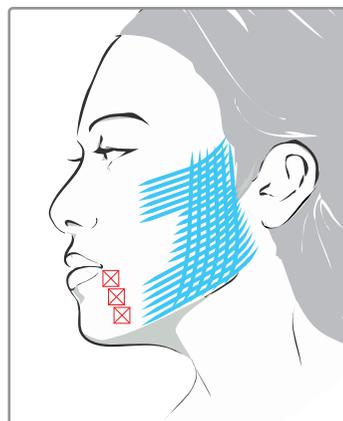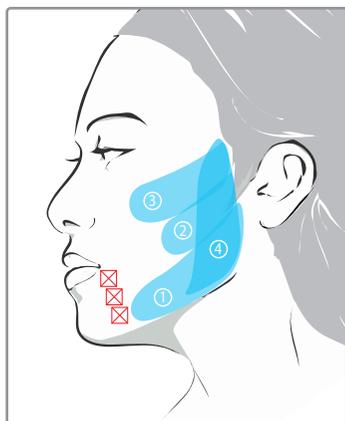

Descrição

Recomenda-se o uso da caneta Liftera no sentido vetorial em direção ao ouvido. A energia é fornecida a partir do meio da superfície de contato de aplicador por um único ponto. Como a área lateral da bochecha tem uma grande quantidade de tecido ligamentar, a caneta deve ser movimentada o mais lentamente possível para aumentar a densidade da entrega de energia.

Atenção


1. Não aplicar abaixo da linha da boca ☒ devido a localização do nervo.
2. Evite sobrepor a aplicação no mesmo local (sempre mover a caneta e com o botão pressionado).
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).

Caneta Liftera

Tratamento para bochechas, mandíbulas, contorno facial e papada



Como aplicar

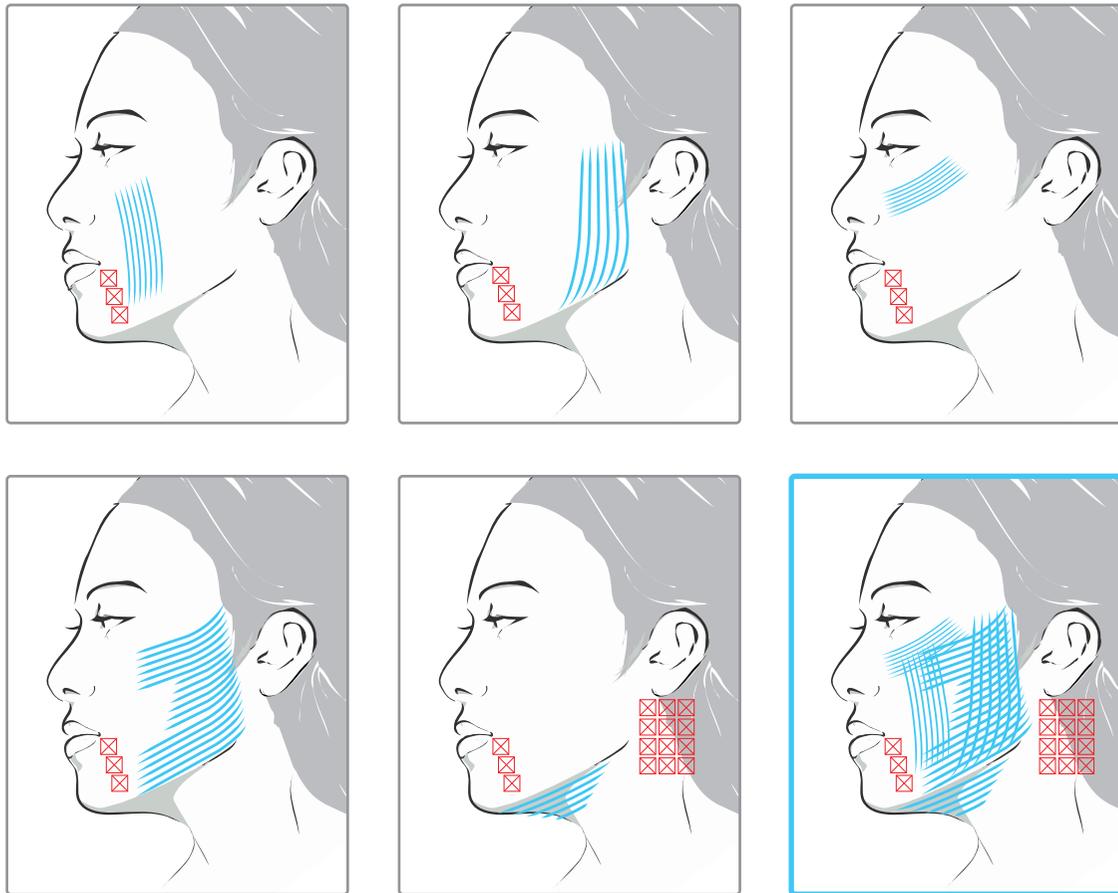

Descrição

Quando utilizar a caneta Liftera para desenho da linha, aplicar na direção vetorial ao invés do modo fricção. Para evitar a sobreposição no mesmo ponto, o início da aplicação deve ser diferente e com intervalo de 1 - 2 cm para controlar o nível de dor e fazer com que a energia térmica seja espalhada de forma adequada.

Atenção



1. Não aplicar abaixo da linha da boca ☒ devido a localização do nervo.
2. Quando tratar a papada, evitar aplicar no final da marcação ☒ e concentrar a aplicação na área demarcada, pressionando levemente a caneta aplicadora.
3. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
4. Quando finalizar o procedimento, solte o botão e remova a caneta Liftera.
5. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para bochechas, mandíbulas, contorno facial e papada



Como aplicar

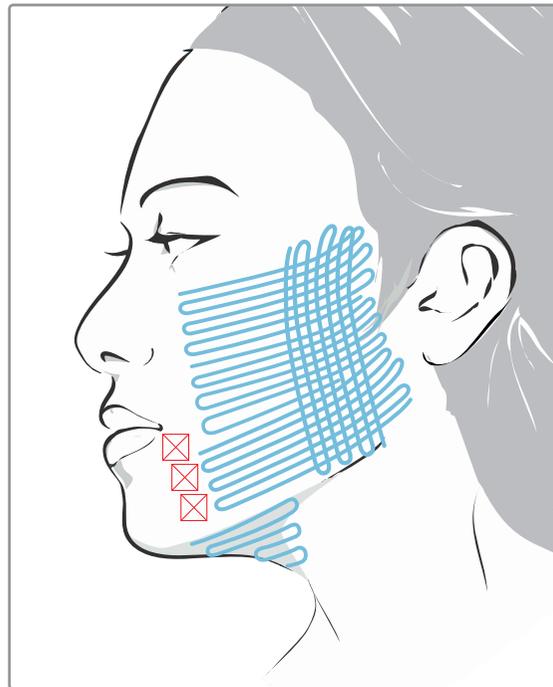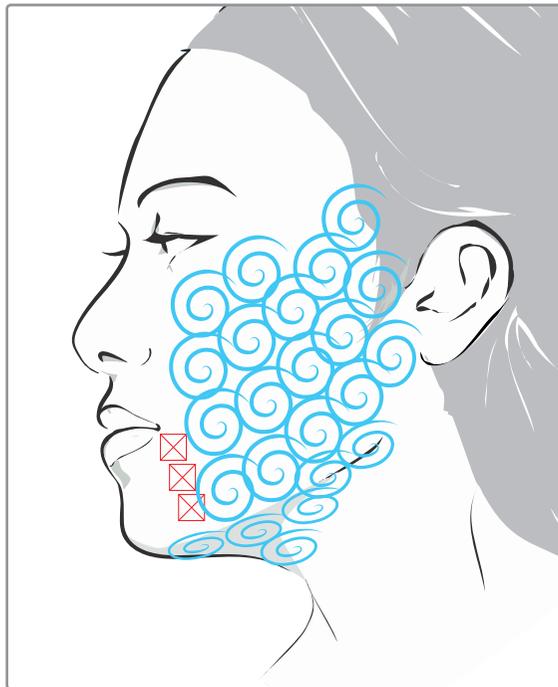

Descrição

Em casos onde o ajuste de energia é maior, para garantir um movimento mais rápido com a caneta Liftera é mais adequado o moving technique ao desenho de linhas.

Atenção

1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento com o cartucho de 1,5 mm.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando finalizar o procedimento, solte o botão e remova a caneta Liftera.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para bochechas, mandíbulas, contorno facial e papada



Como aplicar



Descrição

Ao utilizar energias altas com 1,5mm faça movimentos mais rápido com a caneta Liftera. Como a profundidade é menor, é possível controlar o nível de dor para um tratamento mais suave e superficial.

Atenção




1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento com o cartucho de 1,5 mm.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando finalizar o procedimento, solte o botão e remova a caneta Liftera.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para contorno facial e papada



Como aplicar

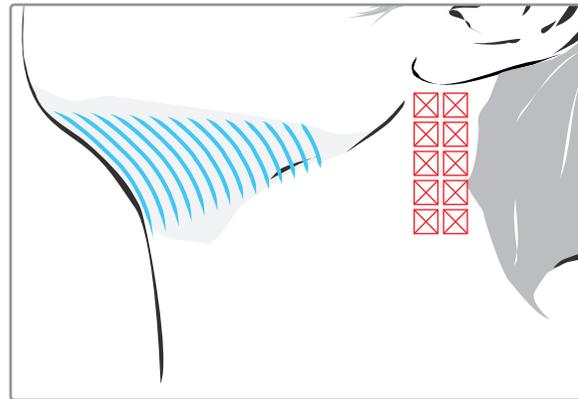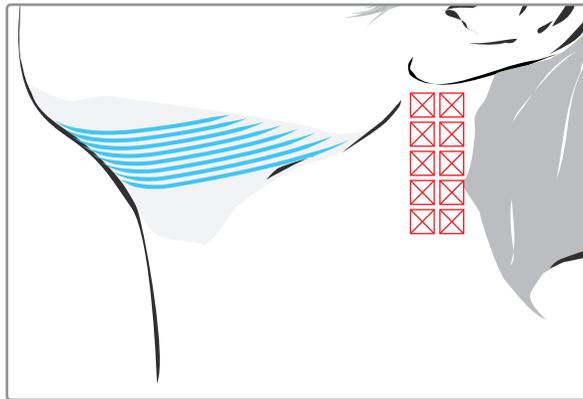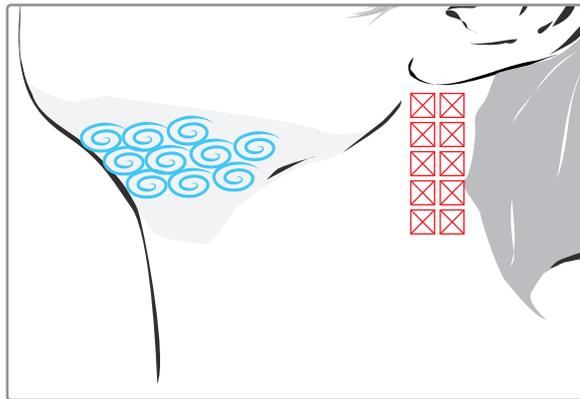

i Descrição

Recomenda-se a aplicação com nível de energia reduzido em comparação ao tratamento na área lateral da bochecha, e sempre monitorar o nível de dor do paciente. Aplicações na linha da mandíbula e contorno facial costumam ser mais dolorosas.

! Atenção



1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento.
2. Quando finalizar o procedimento, solte o botão e remova a caneta aplicadora.
3. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para sulco nasogeniano



Como aplicar

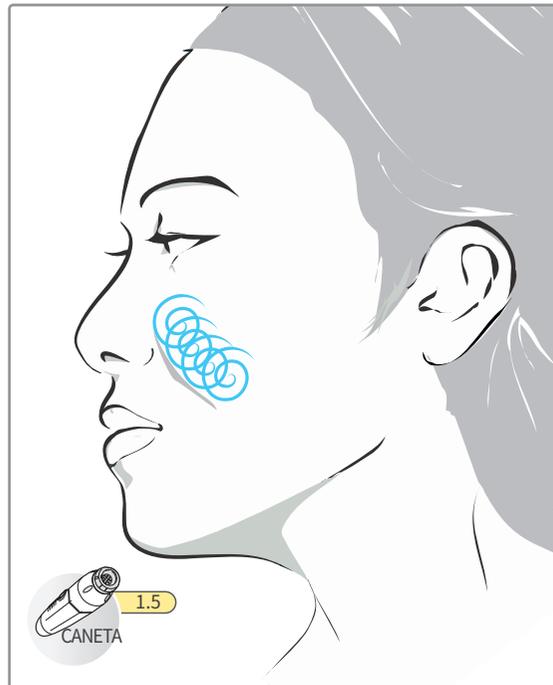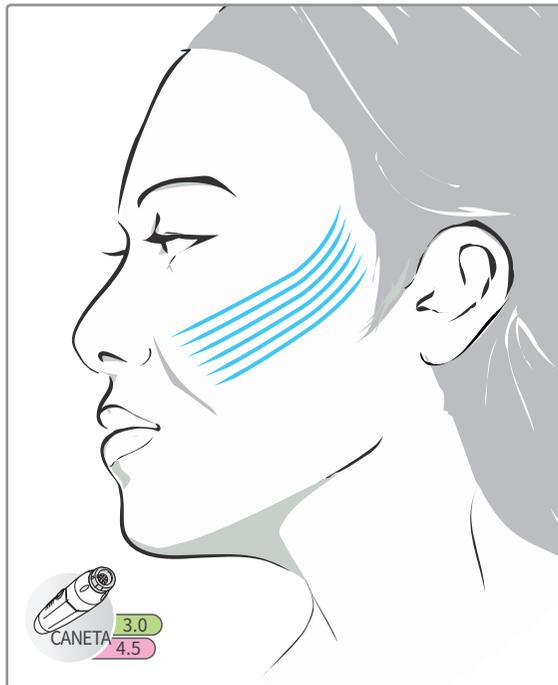

Descrição

Realize o procedimento com o movimento de elevação sulco nasolabial superior em direção ao osso da bochecha, utilizando a caneta Liftera de 3,0mm ou 4,5mm.

Para sulcos nasolabiais, adote o Moving Technique utilizando a caneta Liftera de 1,5mm.

Atenção


1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento com o cartucho de 1,5 mm.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para rugas periorbitais



Como aplicar

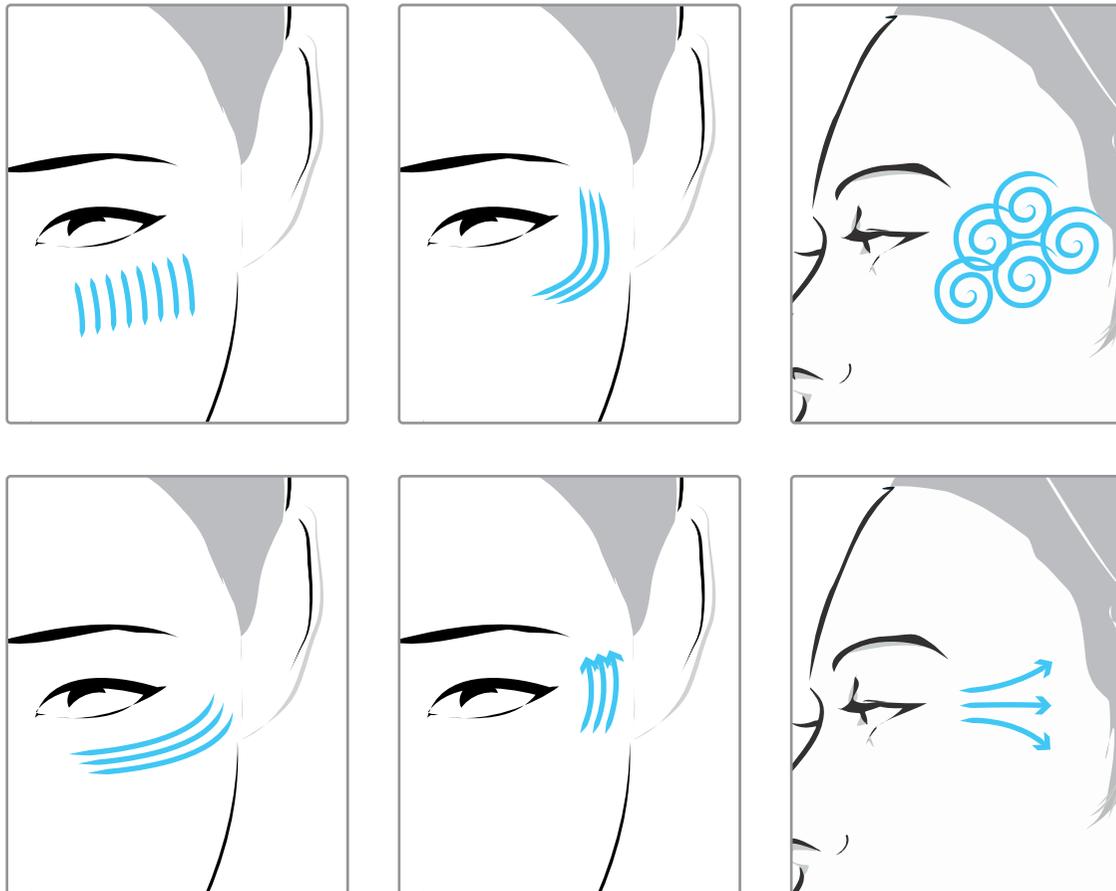

Descrição

Quando realizar o tratamento nas rugas da pálpebra inferior, faça o procedimento “desenhando” linhas por toda área a ser tratada, alcançando todas as rugas e puxando a pálpebra inferior para baixo com as pontas dos dedos. No caso de tratamentos de rugas periorbitais mais profundas, fazer o tratamento com a caneta Liftera de 3,0mm.

Atenção


1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento com o cartucho de 1,5 mm.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).
5. Ao aplicar ao redor da área periorbital, evitar aplicar nos olhos.

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para bolsa de gordura na pálpebra inferior



Como aplicar

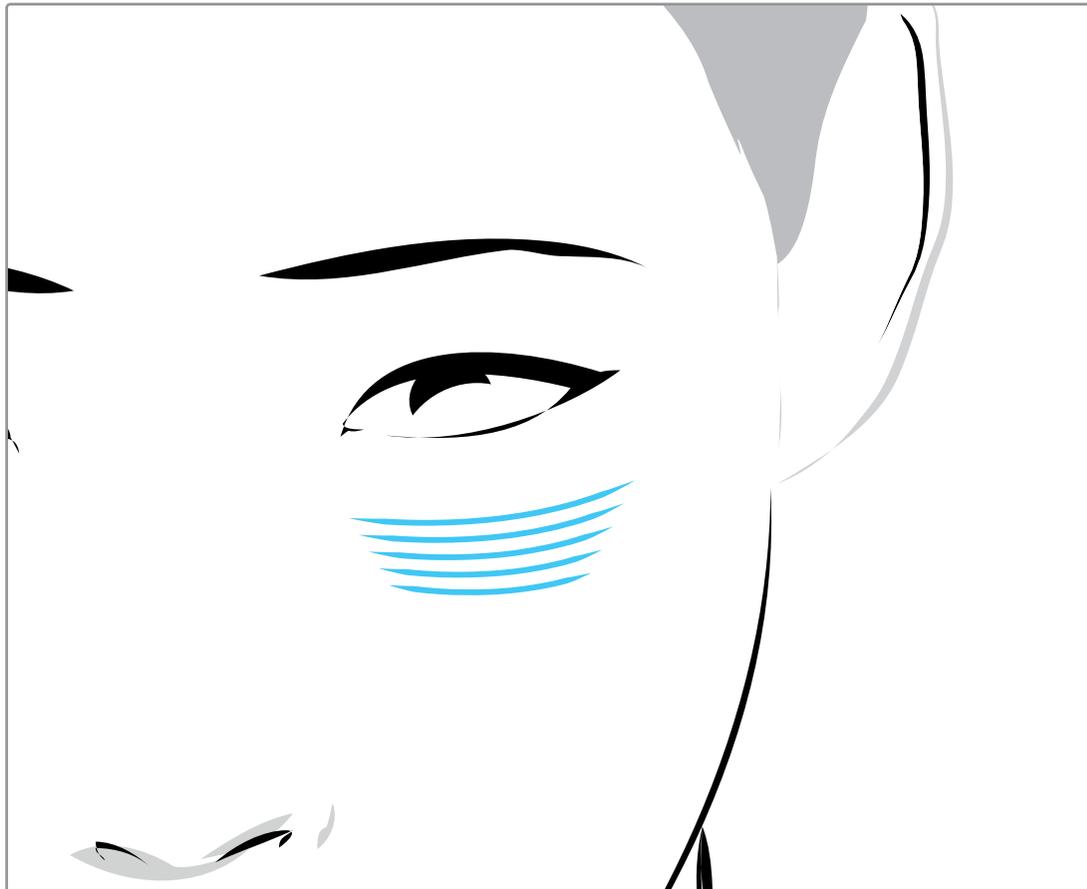

Descrição

Cuidadosamente puxe a pálpebra inferior para baixo com as pontas dos dedos e aplique a caneta Liftera na bolsa de gordura. Se a pele for mais espessa ou se tiver excesso de gordura, aplicar a caneta de 3,0 mm.

Atenção


1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento com o cartucho de 1,5 mm.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).
5. Ao aplicar ao redor da área periorbital, evitar aplicar nos olhos.

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para levantamento de sobrancelha



Como aplicar

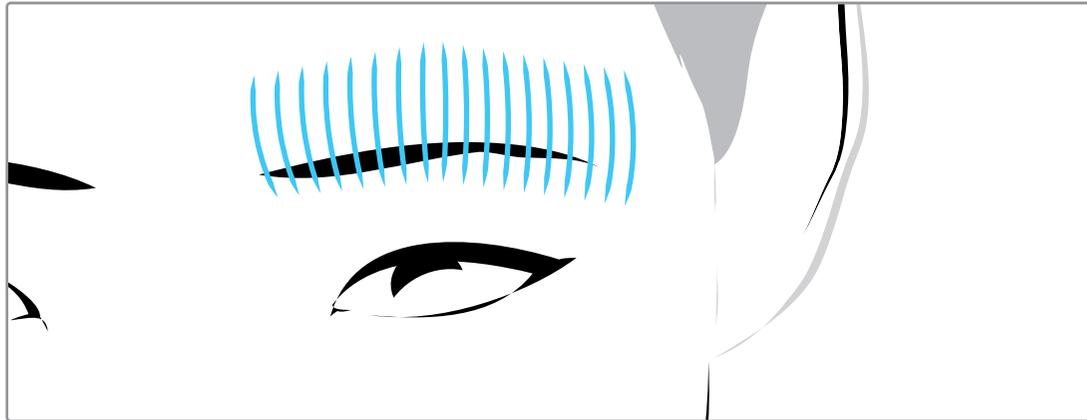

Descrição

Aplique a caneta Liftera puxando a sobrancelha para cima. Se a pele for espessa, aplicar a caneta Liftera de 3,0mm.

Atenção

1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para remoção de rugas na fronte



Como aplicar



i Descrição

Deve-se desenhar linhas de sobrancelha até o topo da testa. No caso das rugas mais profundas na fronte e pele mais espessa, fazer o movimento circular sobre as rugas.

Para rugas finas utilize a caneta Liftera de 1,5mm e para rugas profundas utilize a caneta Liftera de 3,0mm.

! Atenção



1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para rugas periorais



Como aplicar

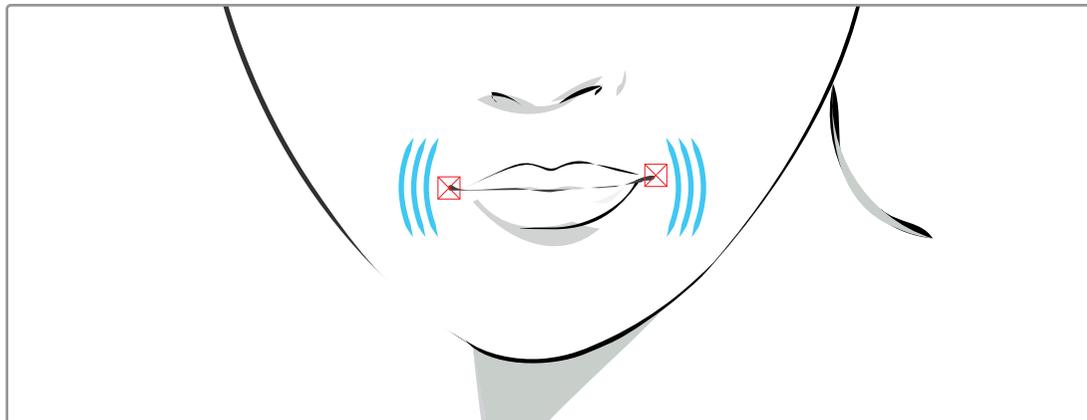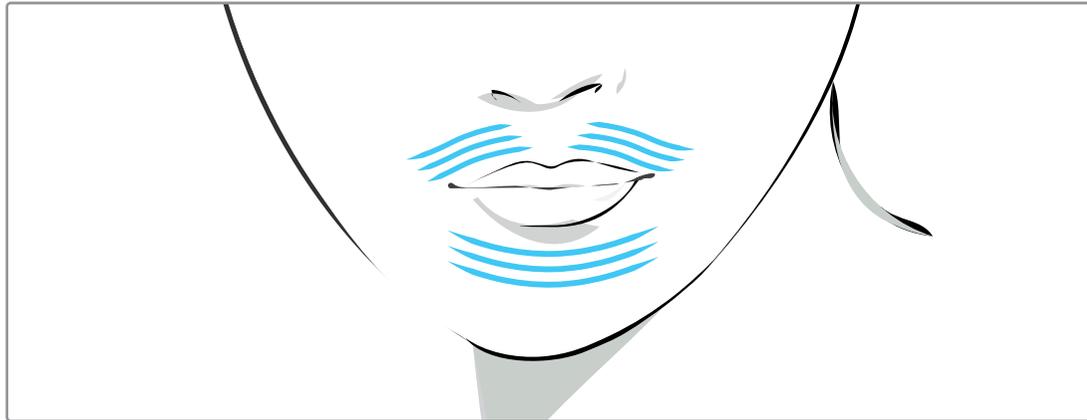

i Descrição

Utilize a caneta Liftera de 1,5mm para realizar o tratamento.
Aplique primeiro em uma metade do lábio superior e depois na outra metade.
Para as rugas no canto da boca, aplique com o movimento no sentido de baixo para cima.

! Atenção




1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento com o cartucho de 1,5 mm.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).
5. Evite passar pela área marcada **X** devido a região com nervo.

Caneta Liftera _ Moving Technique

Tratamento para rugas no pescoço



Como aplicar

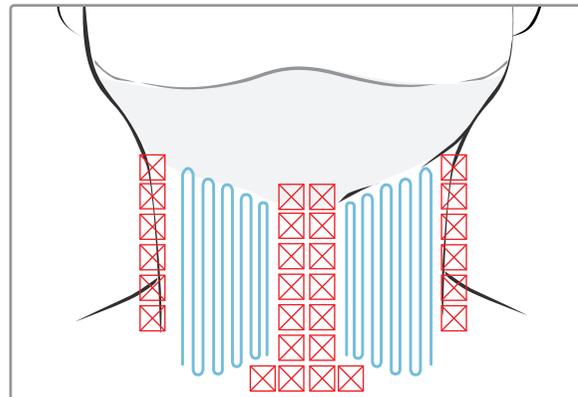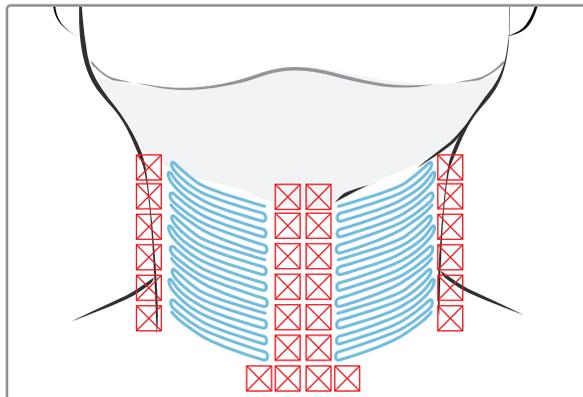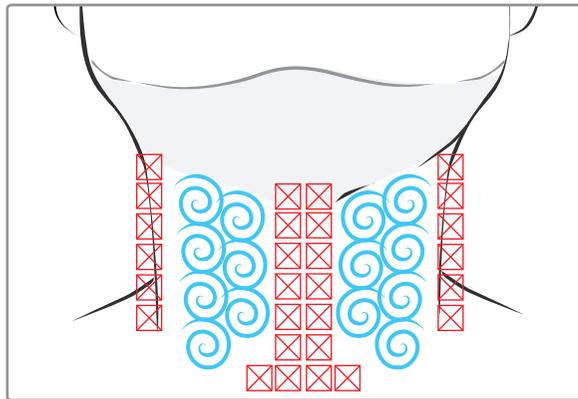

Descrição

Utilize a caneta Liftera conforme os movimentos representados ao lado.

Atenção

1. Importante manter contato total da caneta Liftera com a pele quando estiver fazendo o procedimento.
2. Não acionar a caneta e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade do disparo (Hz).
5. Evite passar pela área marcada ☒ devido a região com nervo.

Capítulo II

Caneta Liftera Guia de tratamento

-Terço Médio -



Caneta Liftera - Guia de Tratamento

Área de Tratamento	Tipo de pele	Tipo de cartucho a utilizar
--------------------	--------------	-----------------------------

Terço médio (Bochecha e papada)

Rosto pequeno / Pouca gordura subcutânea / Pele fina



	Área de Tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)
PASSO 01			0.3~0.4	1.200 Pontos
PASSO 02			0.2~0.3	1.300 Pontos
PASSO 03			0.1~0.2	1.500 Pontos




Considerando a tolerância do paciente e a área de tratamento, aplicar 1200 pontos na região lateral da bochecha, sentido orelha de baixo para cima com a caneta Liftera de 3,0mm. A energia inicial recomendada é de 0,3J, podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.

Conforme “Passo 01”, aplicar 1300 pontos na região lateral da bochecha e papada, considerando a tolerância do paciente e área de tratamento. Evitar a área marcada entre o zigomático e a bochecha ☒, pois trata-se de um rosto fino e sem gordura.

Aplicar 150mm pontos com o moving technique nos dois lados do rosto (bochechas e papada), sempre com o máximo de contato da caneta Liftera na pele quando estiver movendo.

Total 4.000 pontos

Caneta Liftera - Guia de Tratamento

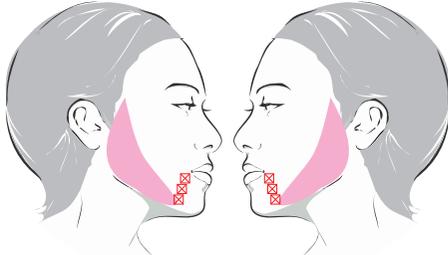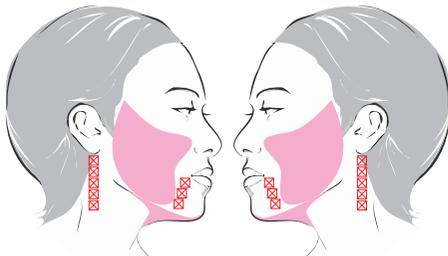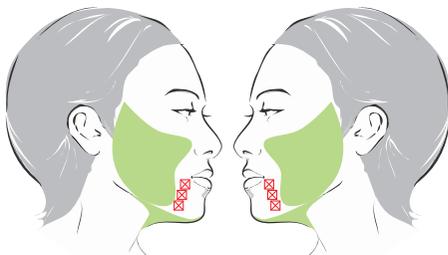Área de Tratamento	Tipo de pele		Tipo de cartucho a utilizar	
Terço Médio (Bochecha e papada)	Rosto de tamanho normal/padrão		 CANETA Aplicadora <ul style="list-style-type: none"> 3.0 4.5 	
PASSO 01	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)
			0.6~0.7	1.500 Pontos
			0.5~0.7	2.000 Pontos
			0.3~0.4	1.500 Pontos



Considerando a tolerância do paciente e a área de tratamento, aplicar 1500 pontos na região lateral da bochecha, sentido orelha de baixo para cima com a caneta Liftera de 4,5mm. A energia inicial recomendada é de 0,6J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido a região com nervo.

Considerando a tolerância do paciente e a área de tratamento, aplicar 2000 pontos na região lateral da bochecha e papada com energia de 0,5J, podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca e da orelha ☒ devido região com nervo.

Aplicar 1500 pontos com o moving technique nos dois lados do rosto, bochechas e papadas com a caneta Liftera de 3,0mm.

Total 5.000 pontos

Caneta Liftera - Guia de Tratamento

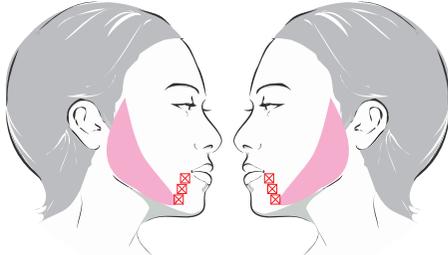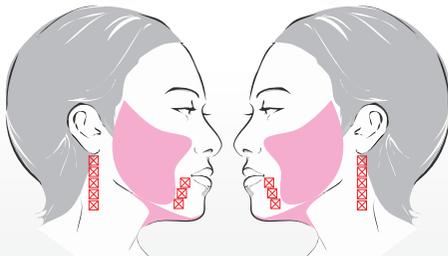Área de Tratamento	Tipo de pele		Tipo de cartucho a utilizar	
Terço médio (Bochecha e papada)	Rosto largo / com gordura subcutânea/ pele mais espessa		 CANETA Aplicadora	
Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)	
PASSO 01 	 4.5	0.7~0.9	2.000 Pontos	
PASSO 02 	 4.5	0.7~0.9	2.000 Pontos	
PASSO 03 	 3.0	0.3~0.4	2.000 Pontos	

Considerando a tolerância do paciente e a área de tratamento, aplicar 2000 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha e de baixo para cima com a caneta Liftera de 4,5mm. A energia inicial recomendada é de 0,7J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido reigião com nervo.

Conforme “Passo 01” aplicar 2000 pontos na região lateral da bochecha e papada considerando a tolerância do paciente e área de tratamento. Evitar a área marcada devido ☒ a região com nervos.

Aplicar 2000 pontos com o moving tecnique nos dois lados do rosto, bochechas e papada com a caneta Liftera de 3,0mm.

Total 6.000 pontos

Capítulo III


Caneta Liftera Guia de Tratamento

-Face completa e textura de pele -



Caneta Liftera - Guia de Tratamento

Área de Tratamento	Tipo de pele	Cartucho a utilizar
Face toda e textura de pele	Rosto pequeno / Pouca gordura subcutânea/ Pele fina	 CANETA Aplicadora

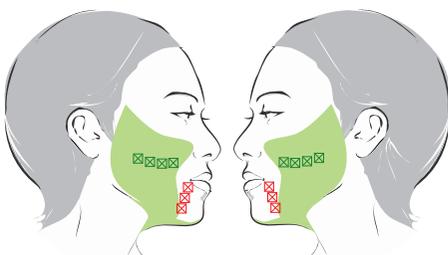	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)
<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> PASSO 01 </div>		 3.0	0.3~0.4	200 Pontos
		 1.5	0.1~0.2	500 Pontos
		 1.5	0.1~0.2	1.500 Pontos


Considerando a tolerância do paciente e a área de tratamento, aplicar 2500 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha e de baixo para cima com a caneta Liftera de 3,0mm. A energia inicial recomendada é de 0,3J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ❌ devido região com nervo, também evitar a área entre o zigomático e bochecha ☑ pois trata-se de rosto fino e sem gordura.

Aplicar 1000 pontos no modo moving technique com a caneta Liftera de 1,5mm. Ao tratar a pálpebra inferior, puxe com as pontas dos dedos para proteger e evitar contato com os olhos. Quando for tratar flacidez de sobrelanceira, aplique a caneta Liftera como se estivesse puxando para cima. Para o tratamento da frente, desenhe linhas da sobrelanceira até o topo da testa e após isso fazer a aplicação de moving technique. Quando for tratar lábio superior, aplicar um lado de cada vez.

Aplicar 1500 pontos com o moving technique nos dois lados do rosto (bochechas e papada). Sempre com o máximo contato da caneta Liftera na pele quando estiver movendo.

Total 4.500 pontos

Caneta Liftera - Guia de Tratamento

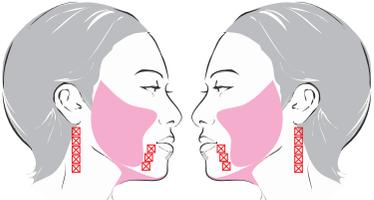Área de Tratamento	Tipo de pele		Tipo de cartucho a utilizar	
Face toda e textura da pele	Rosto de tamanho normal/padrão			
	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)
PASSO 01			0.5~0.7	3,500 Pontos
PASSO 02			0.3~0.4	1.500 Pontos
PASSO 03			0.1~0.2	700 Pontos
PASSO 04			0.1~0.2	800 Pontos

Considerando a tolerância do paciente e a área de tratamento, aplicar 3500 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha e de baixo para cima com a caneta Liftera de 4,5mm. A energia inicial recomendada é de 0,5J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca  devido a região com nervos.

Aplicar 1500 pontos com o moving Technique nos dois lados do rosto, bochechas e papada com a caneta Liftera de 3,0mm.

Aplicar 700 pontos no modo moving Technique com a caneta Liftera de 1,5mm. Quanto tratar a pálpebra inferior, puxe com as pontas dos dedos para proteger e evitar contato com os olhos. Quando for tratar a flacidez de sobrelha, aplique a caneta Liftera como se estivesse puxando para cima. Para o tratamento da frente, desenhe linhas da sobrelha até o topo da testa e após isso, fazer aplicação de moving Technique. No caso do lábio superior, aplicar um lado de cada vez.

Aplicar 800 pontos com o moving Technique nos dois lados do rosto, bochechas e papada com a caneta Liftera de 1,5mm. Sempre com o máximo de contato da caneta Liftera na pele quando estiver movendo.

Total 6.500 pontos

Caneta Liftera - Guia de Tratamento

Área de Tratamento	Tipo de pele	Tipo de cartucho a utilizar
--------------------	--------------	-----------------------------

Face toda e textura da pele Rosto grande / com gordura subcutânea/ pele espessa



	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)
PASSO 01			0.7~0.9	4.000 Pontos
PASSO 02			0.4~0.5	2.000 Pontos
PASSO 03			0.1~0.2	1.000 Pontos
PASSO 04			0.1~0.2	1.000 Pontos

Considerando a tolerância do paciente e da área de tratamento, aplicar 4000 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha e de baixo para cima com a caneta Liftera de 4,5mm. A energia inicial recomendada é de 0,7J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido a região com nervo.

Aplicar 2000 pontos com o moving technique nos dois lados do rosto, bochechas e papapada com a caneta Liftera de 3,0mm.

Aplicar 1000 pontos no modo moving technique com a caneta Liftera de 1,5mm. Quando tratar a pálpebra inferior, puxe com as pontas dos dedos para proteger e evitar contato com os olhos. Quando for tratar flacidez de sobrelceha, aplique a caneta Liftera como se estivesse puxando para cima. Para o tratamento da frente, desenhe linhas da sobrelceha até o topo da testa e após isso fazer a aplicação de moving technique. Ao tratar lábio superior, aplicar um lado de cada vez.

Aplicar 1000 pontos com o moving technique nos dois lados do rosto, bochechas e papada com a caneta Liftera de 1,5mm. Sempre como máximo de contato da caneta Liftera na pele quando estiver movendo,

Total 8.000 pontos

Caneta Liftera - Guia de Tratamento

Área de atamento	Tipo de pele	Tipo de cartucho a utilizar
------------------	--------------	-----------------------------

Face toda e textura da pele

Rugas finas



	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)
PASSO 01			0.1~0.2	3.000 Pontos
			0.1~0.2	2.000 Pontos

Quando tratar a pálpebra inferior, puxar para baixo com as pontas dos dedos para aplicar e proteger os olhos. Para tratar a flacidez de sobrancelha, aplicar no sentido sobrancelha até o topo da testa. Tratando a fronte, desenhar linhas retas da sobrancelha até o topo da testa e após isso fazer a aplicação de moving technique. Quando for tratar lábio superior, aplicar um lado de cada vez.

Importante manter o total contato da caneta Liftera na pele quando estiver fazendo o procedimento com o cartucho de 1,5mm.

Total 5.000 pontos






Capítulo IV

Caneta Liftera & Cartucho em linha Guia de Tratamento

-Terço Médio Inferior -



Caneta Liftera & Linha - Guia de Tratamento

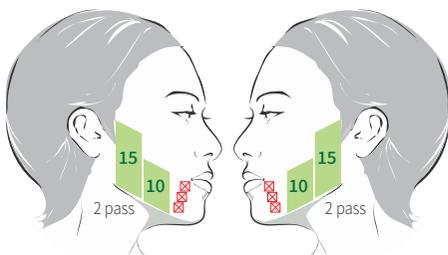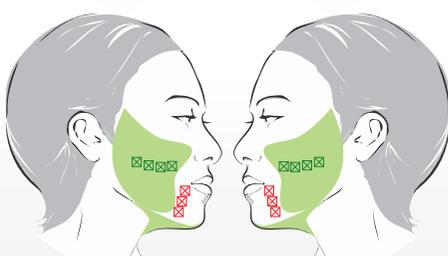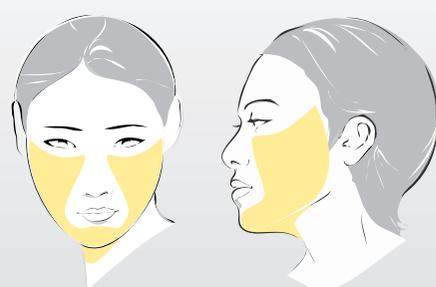Área de Tratamento	Tipo de pele		Tipo de cartucho a utilizar	
Terço Médio (bochechas e papada)	Rosto pequeno/ pouca gordura subcutânea / Pele fina		 3.0 TRANSDUTOR em linha	 1.5 CANETA Aplicadora
Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)	
PASSO 01 	 3.0	0.3~0.4	100 Linhas	
PASSO 02 	 3.0	0.2~0.3	1.000 Pontos	
PASSO 03 	 1.5	0.1~0.2	1.500 Pontos	




Aplique 50 linhas de cada lado do rosto (10 disparos com duas passadas e 15 disparos com duas passadas) na região lateral da bochecha, sentido da linha da mandíbula até a orelha, de baixo para cima com intervalo de 2-3mm entre cada disparo. A energia inicial recomendada é de 0,3J devendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.

Considerando a tolerância do paciente e a área de tratamento, aplicar 1000 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha de baixo para cima com a caneta Liftera de 3,0mm. A energia inicial recomendada é de 0,3J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido a região com nervo e também evitar ☒ a área entre o zigomático e bochecha, pois trata-se de rosto fino e sem gordura.

Aplicar 1500 pontos com o moving tecniqe nos dois lados do rosto bochechas e papada com a caneta Liftera de 1,5mm. Sempre com o máximo contato da caneta na pele quando estiver em movimento.




Total 100 linhas e 2.500 pontos

Caneta Liftera & Linha - Guia de Tratamento

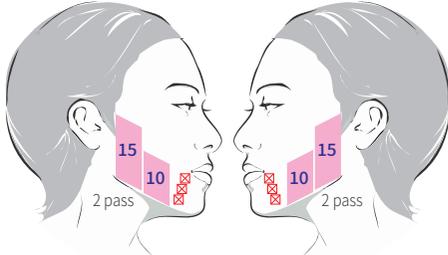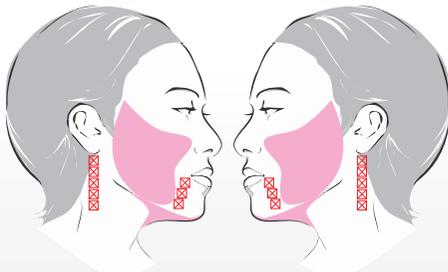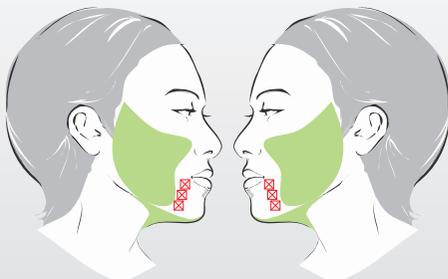Área de Tratamento	Tipo de pele	Tipo de cartucho a utilizar			
Terço médio (bochechas e papada)	Rosto tamanho normal/ padrão	 TRANSDUTOR 4.5 em linha	 CANETA 3.0 Aplicadora		
PASSO 01	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)	
		 4.5	0.6~0.7	100	<p>Linhas</p> <p>Aplicar 50 linhas de cada lado do rosto (10 disparos com duas passadas e 15 disparos com duas passadas) na região lateral da bochecha, sentido da linha da maníbula até orelha, de baixo para cima com intervalo de 2-3mm entre cada disparo. A energia inicial recomendada é de 0,6J devendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.</p>
		 4.5	0.5~0.7	2.000	<p>Pontos</p> <p>Aplicar 2000 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha e de baixo para cima com a caneta Liftera de 4,5mm. A energia inicial recomendada é de 0,5J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.</p>
		 3.0	0.3~0.4	1.500	<p>Pontos</p> <p>Aplicar 1500 pontos com o moving tecniqe nos dois lados do rosto, bochechas e papada com a caneta Liftera de 3,0mm. Sempre com o máximo contato da caneta na pele quando estiver movendo.</p>

Total 100 linhas e 3.500 pontos

Caneta Liftera & Linha - Guia de Tratamento

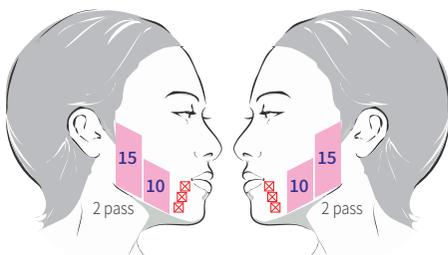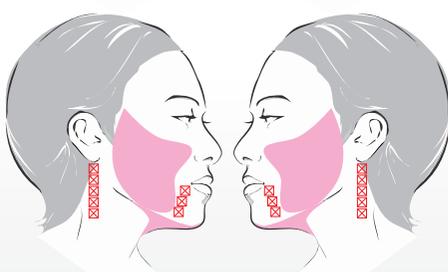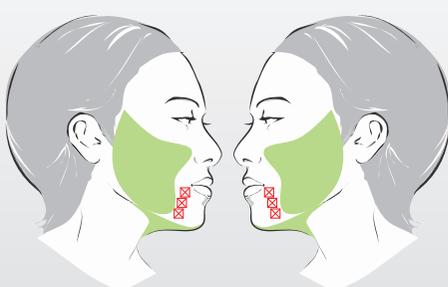Área de Tratamento	Tipo de pele		Tipo de cartucho a utilizar	
Terço médio (bochecha e papada)	Rosto tamanho normal / padrão		 TRANSDUTOR 4.5 em linha	 CANETA 3.0 / 4.5 Aplicadora
	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)
PASSO 01		 4.5	0.7~0.9	100 Linhas
PASSO 02		 4.5	0.7~0.9	2.500 Pontos
PASSO 03		 3.0	0.4~0.5	2.000 Pontos

Aplicar 50 linhas de cada lado do rosto (10 disparos com duas passadas e 15 disparos com duas passadas) na região lateral da bochecha, sentido da linha da maníbula até orelha, de baixo para cima com intervalo de 2-3mm entre cada disparo. A energia inicial recomendada é de 0,7J devendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.

Aplicar 2000 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha e de baixo para cima com a caneta Liftera de 4,5mm. A energia inicial recomendada é de 0,7J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.

Aplicar 2000 pontos com o moving technique nos dois lados do rosto, bochechas e papada com a caneta Liftera de 3,0mm. Sempre com o máximo contato da caneta na pele quando estiver movendo.

Total 100 linhas e 4.500 pontos




Capítulo V

Caneta Liftera & Transdutor em linha Guia de Tratamento

-Face completa & textura de pele -




Caneta Liftera & Linha - Guia de Tratamento

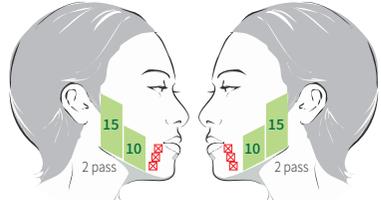Área de Tratamento	Tipo de pele	Tipo de cartucho a utilizar			
Face toda e textura de pele	Rosto pequeno/ Pouca gordura subcutânea / Pele fina	 3.0 TRANSDUTOR em linha	 1.5 CANETA Aplicadora		
	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de disparos (Dois lados)	
PASSO 01		 3.0	0.3~0.4	100 Linhas	Aplicar 50 linhas de cada lado do rosto (10 disparos com duas passadas e 15 disparos com duas passadas) na região lateral da bochecha, sentido da linha da maníbula até orelha, de baixo para cima com intervalo de 2-3mm entre cada disparo. A energia inicial recomendada é de 0,3J devendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.
PASSO 02		 3.0	0.3~0.4	1.000 Pontos	Considerando a tolerância do paciente e a área de tratamento, aplicar 1000 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha de baixo para cima com a caneta Liftera de 3,0mm. A energia inicial recomendada é de 0,3J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido a região com nervo e também evitar ☑ a área entre o zigomático e bochecha, pois trata-se de rosto fino e sem gordura.
PASSO 03		 1.5	0.1~0.2	1.000 Pontos	Aplicar 1000 pontos no modo moving technique com a caneta Liftera de 1,5mm. Sempre com o máximo contato da caneta na pele quando estiver movendo. Quando for tratar flacidez de sobrelha, aplique a caneta Liftera como se estivesse puxando para cima. Para o tratamento da frente, desenhe linhas da sobrelha até o topo da testa e após isso, fazer a aplicação do moving technique. Quando for tratar lábio superior, aplicar um lado de cada vez.
PASSO 04		 1.5	0.1~0.2	1.500 Pontos	Aplicar 1500 pontos com o moving technique nos dois lados do rosto, bochechas e papada utilizando a caneta Liftera de 1,5mm. Sempre com o máximo de contato da caneta na pele quando estiver em movimento.

Total 100 linhas e 3.500 pontos

Caneta Liftera & Linha - Guia de Tratamento

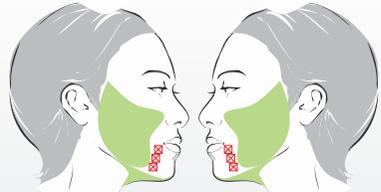Área de Tratamento	Tipo de pele	Tipo de cartucho a utilizar			
Face toda e textura da pele	Tamanho normal / padrão	 TRANSDUTOR 4.5 em linha  CANETA Aplicadora			
PASSO 01	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de Disparos (Dois lados)	<p>Aplique 50 linhas de cada lado do rosto (10 disparos com duas passadas, e 15 disparos com duas passadas) na região lateral da bochecha, sentido da linha da mandíbula até orelha, de baixo para cima com intervalo de 2-3mm entre cada disparo. A energia inicial recomendada é de 0,6J devendo aumentar de acordo com a tolerância de paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.</p>
PASSO 02		 4.5	0.5~0.7	2.000 Pontos	<p>Aplicar 2.000 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha de baixo para cima com a caneta Liftera de 4,5mm. A energia inicial recomendada é de 0,5J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.</p>
PASSO 03		 3.0	0.3~0.4	1.500 Pontos	<p>Aplicar 1.500 pontos com o moving technique nos dois lados do rosto, bochechas e papada com a caneta Liftera de 3,0mm.</p>
PASSO 04		 1.5	0.1~0.2	1.500 Pontos	<p>Aplicar 1.000 pontos no modo moving technique com a caneta Liftera de 1,5mm. Quando tratar a pálpebra inferior, puxe com as pontas dos dedos para evitar e proteger os olhos. Quando for tratar flacidez de sobrancelha, aplique a caneta Liftera como se estivesse puxando para cima. Para tratamento da fronte desenhe linhas da sobrancelha até o topo da testa e após isso fazer a aplicação do moving technique. Quando for tratar lábio superior, aplicar um lado de cada vez. Aplique 1.000 disparos nos dois lados na região da bochecha e queixo.</p>

Total 100 linhas e 5.000 pontos

Caneta Liftera & Linha - Guia de Tratamento

Área de Tratamento	Tipo de pele	Tipo de cartucho a utilizar
--------------------	--------------	-----------------------------

Face toda e textura da pele

Rosto grande/ Gordura no subcutâneo/ Pele espessa



TRANSDUTOR 4.5
em linha



CANETA 4.5
Aplicadora

	Área de tratamento	Cartucho	Energia(J)	Nº de Disparos (Dois lados)
PASSO 01			0.7~0.9	100 Linhas
PASSO 02			0.7~0.9	2.500 Pontos
PASSO 03			0.4~0.5	2.000 Pontos
PASSO 04			0.1~0.2	2.000 Pontos

Aplice 50 linhas de cada lado do rosto (10 disparos com duas passadas, e 15 disparos com duas passadas) na região lateral da bochecha, sentido da linha da mandíbula até orelha, de baixo para cima com intervalo de 2-3mm entre cada disparo. A energia inicial recomendada é de 0,6J devendo aumentar de acordo com a tolerância de paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.

Aplicar 2.500 pontos na região lateral da bochecha, sentido a orelha de baixo para cima com a caneta Liftera de 4,5mm. A energia inicial recomendada é de 0,5J podendo aumentar de acordo com a tolerância do paciente. Evitar aplicar abaixo da boca ☒ devido região com nervo.

Aplicar 2.000 pontos com o moving tecnique nos dois lados do rosto, bochechas e papadas com a caneta Liftera de 3,0mm.


Aplicar 1.000 pontos com o moving tecnique nos dois lados do rosto, bochechas e papadas com a caneta Liftera de 1,5mm. Quando tratar a pálpebra inferior, puxe com as pontas dos dedos para proteger e evitar contato com os olhos. Ao tratar flacidez de sobrancelha, aplique a caneta Liftera como se estivesse puxando para cima. Para o tratamento da frente, desenhe linhas da sobrancelha até o topo da testa e após isso fazer a aplicação do moving tecnique. Quando for tratar lábio superior aplicar um lado de cada vez. Aplique 1.500 disparos nos dois lados na região da bochecha e queixo.

Total 100 linhas e 7.000 pontos


Caneta Liftera & Linha - Guia de Tratamento

Pescoço

Como aplicar

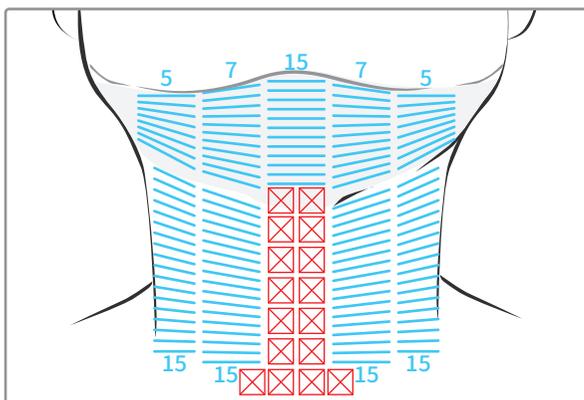

or

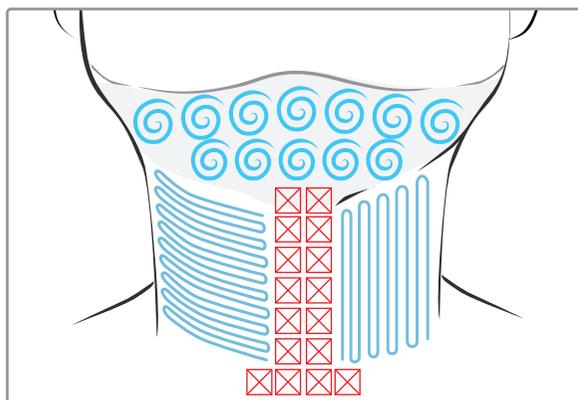

Cartucho em linha	Energia(J)	Linhas
4.5	0.3~0.5	100
3.0	0.2~0.3	100
1.5	0.1~0.2	100

Caneta Liftera	Energia(J)	Pontos
4.5	0.3~0.5	1.500
3.0	0.2~0.3	1.500
1.5	0.1~0.2	1.500

Descrição

Geralmente o paciente sente um pouco mais de desconforto próximo a mandíbula e ao queixo, aplicar níveis de energia diferentes caso seja necessário.

Atenção

1. Importante o total contato da caneta Liftera.
2. Não acionar a caneta Liftera e deixá-la parada em um mesmo local da pele.
3. Quando parar de mover ou terminar o procedimento, solte o botão e remova a caneta Liftera.
4. Ajuste o movimento da caneta com a velocidade de disparo (Hz).
5. Evite passar pela área marcada ☒ devido região com nervos.

Conheça mais sobre Liftera.

Acesse o site www.liftera.com.br
e nos siga nas redes sociais



Liftera