

# Liftera

## VISION

## Protocolo de Tratamento Facial



ASTERASYS

Este guia de tratamento foi desenvolvido e homologado pelos dermatologistas Dr. Renato Soriani, CRM 121.106 e Dra. Clarissa Da Hora CRM 107.522, para auxiliar no tratamento das diferentes indicações e regiões da face e do corpo com o **ultrassom microfocado digital Liftera**. Os protocolos apresentados podem ser complementados com o conhecimento anatômico e a experiência clínica de cada médico para **individualizar** os tratamentos de acordo com as indicações e necessidades de seu paciente.

# ÍNDICE

---

1

- 1.1 - Áreas Anatômicas
- 1.2 - Compartimentos de Gordura
- 1.3 - Cuidados com a Aplicação

2

- 2.1 - Caneta Liftera - Aplicação em Vetores
- 2.2 - Caneta Liftera - Aplicação em Vetores

3

- 3.1 - Full Face - Submandibular
- 3.2 - Full Face - Terço Inferior
- 3.3 - Full Face - Pálpebras e Terço Superior
- 3.4 - 1/3 Inferior - Padrão (Full), flacidez e volume
- 3.5 - 1/3 Inferior - Preservar o volume do Zigomático Malar e Submalar
- 3.6 - 1/3 Inferior - Sulco nasolabial - Flacidez / Gordura
- 3.7 - 1/3 Superior
- 3.8 - Full Face - Textura da pele
- 3.9 - Pescoço - Caneta Liftera
- 3.10 - Colo



# 1

## Áreas Anatômicas




## 1.1 - ÁREAS ANATÔMICAS

O tamanho e formato das áreas **podem** variar de acordo com a anatomia de cada paciente.




- A Zigomático Malar
- B Submalar
- C Linha da Mandíbula
- D Pré Parotídea
- E Nasolabial
- F Orbicular

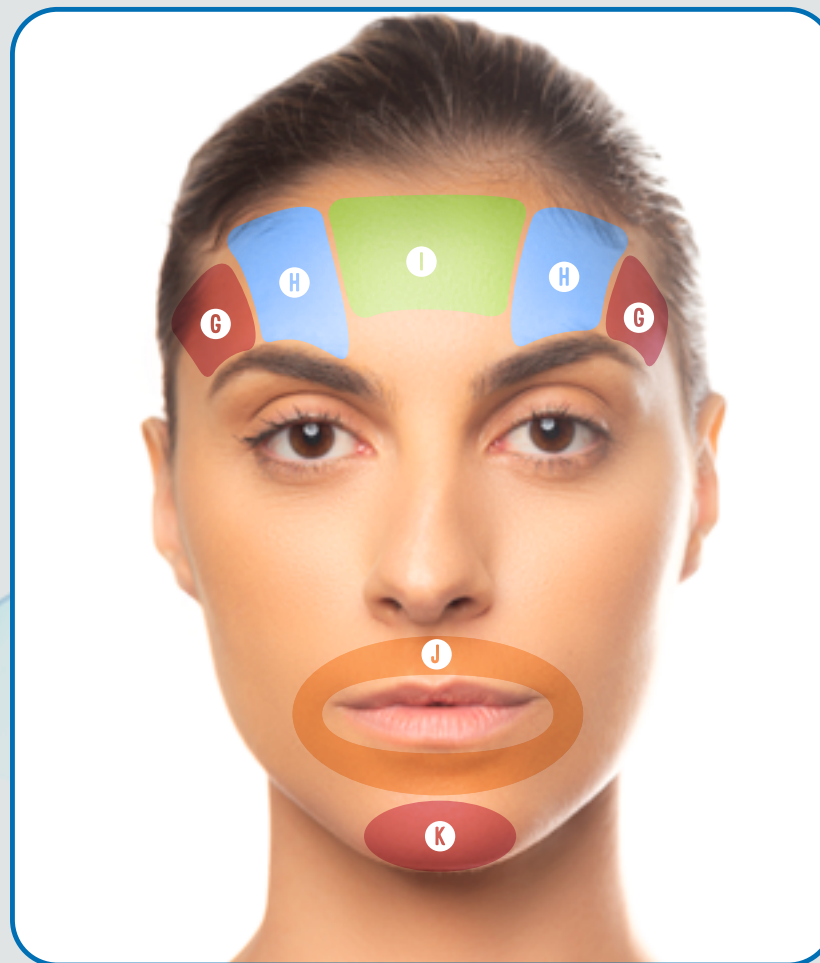

- G 1/3 Lateral Sobrancelhas
- H 1/3 Médio Sobrancelhas
- I Fronte
- J Perioral
- K Mento

## 1.2 - COMPARTIMENTOS DE GORDURA

Os tratamentos com Liftera permitem “esculpir” os pacientes preservando e suavizando os compartimentos de gordura faciais.

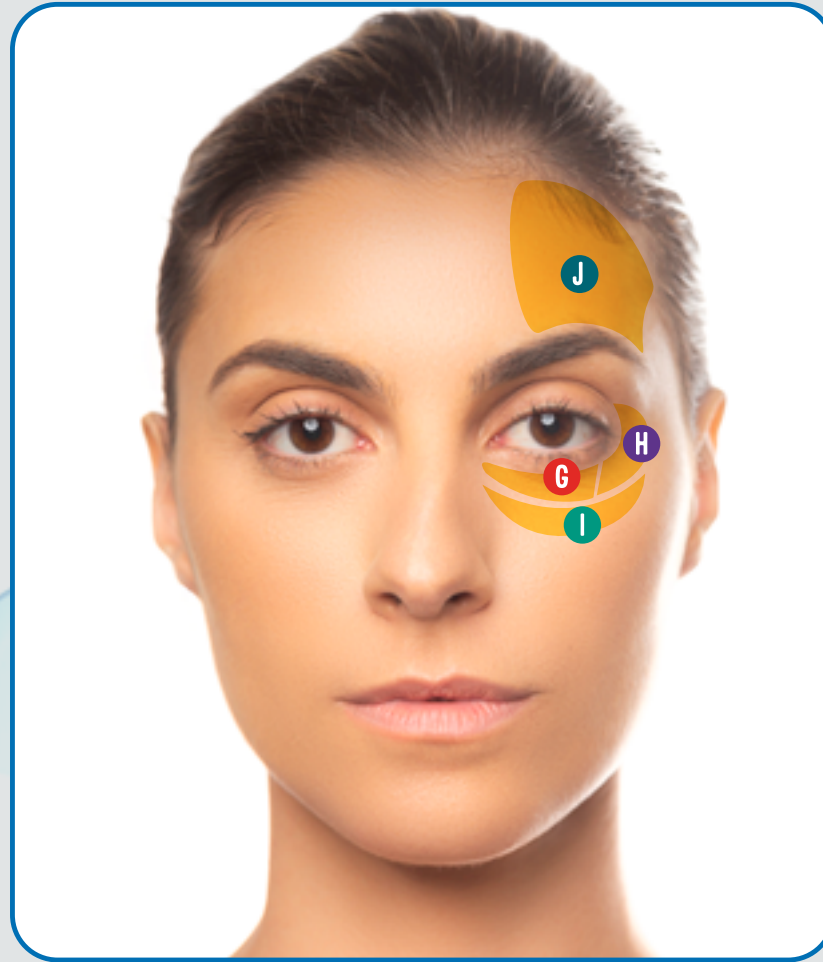


- A Malar medial superficial
- B Submalar profundo
- C Malar Intermediário


- D Temporolateral
- E Jowl
- F Nasolabial Superficial

- G Periorbital inferior
- H Periorbital lateral
- I Suborbicular
- J Frontal

### 1.3 - CUIDADOS COM A APLICAÇÃO

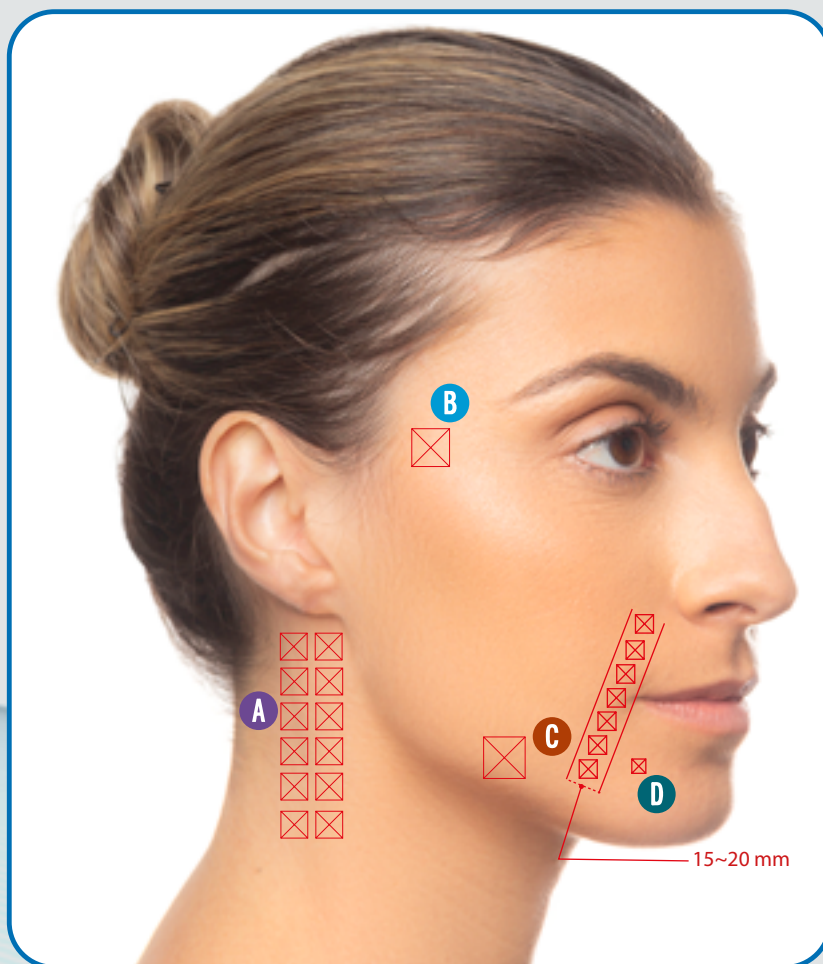

- A** Região Auricular
- B** Região Temporal
- C** Nervo Marginal da Mandíbula
- D** Mentoniano

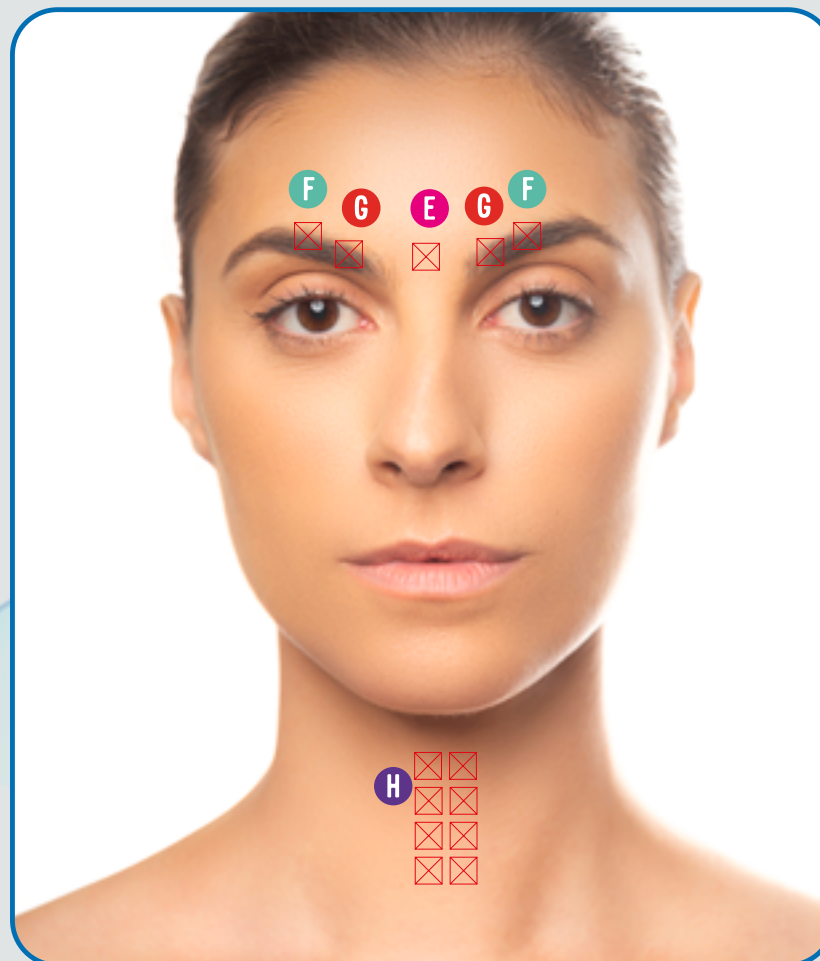





- E** Glabella
- F** Nervo Supraorbital
- G** Nervo Supratroclear
- H** Tireóide

# 2

---

Aplicações

## 2.1 - CANETA LIFTERA | Aplicação em vetores

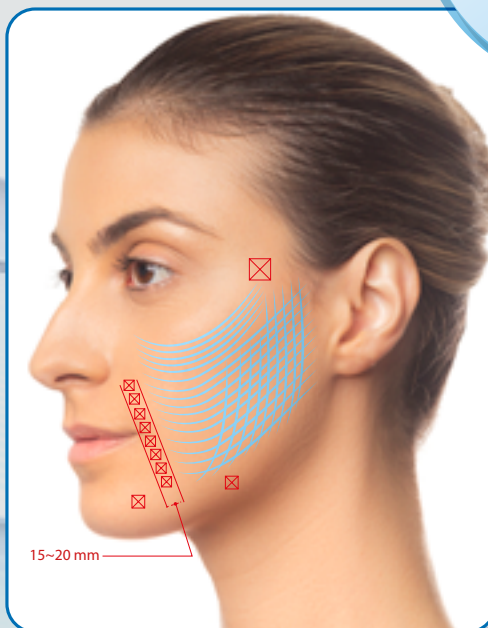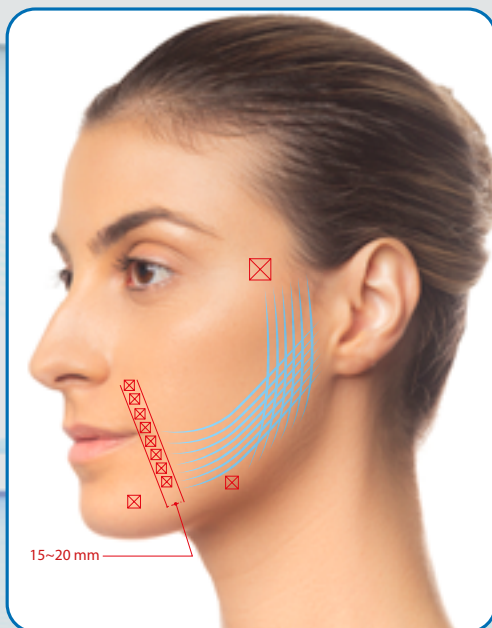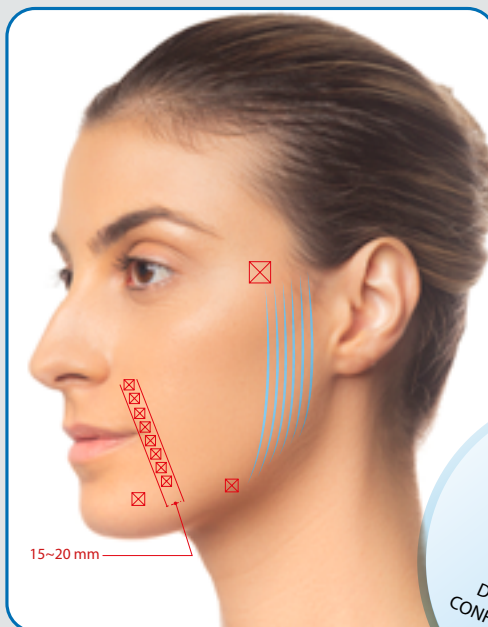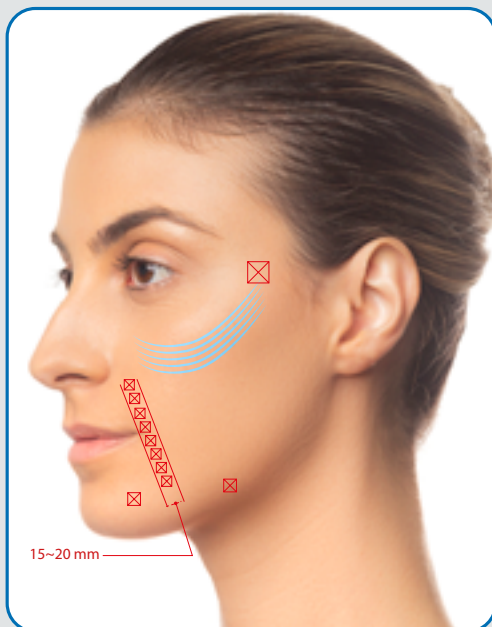




### Descrição

- As aplicações em vetores são utilizadas para desenhar linhas **mais orgânicas de coagulação**.
- Os vetores podem ser aplicados paralelamente em uma única direção ou em protocolos cruzados (hashtags).
- A distância entre cada vetor é de **5 mm**.

### Atenção

- **1º Acoplar a Caneta Liftera na pele; 2º Iniciar o movimento; 3º Apertar o botão de disparo.**
- **Sempre movimentar a Caneta Liftera enquanto estiver disparando.**
- **Nunca deixar a Caneta Liftera parada em um mesmo local da pele enquanto dispara.**
- **Ao finalizar o vetor, soltar o botão e então remover a Caneta Liftera, para evitar a superficialização dos pontos de coagulação.**
- **Evitar sobreposição dos vetores.**

## 2.2 - CANETA LIFTERA | Aplicação em vetores

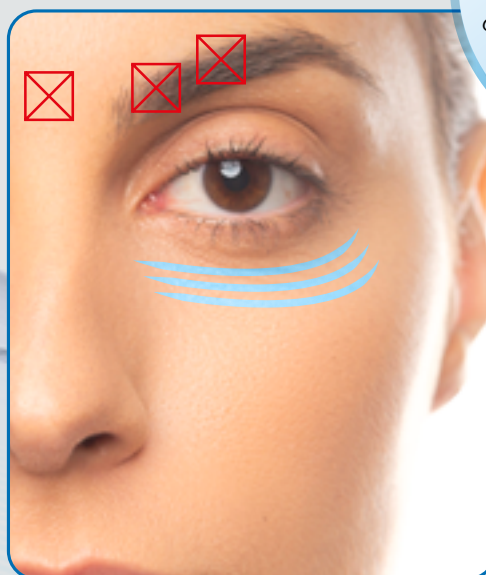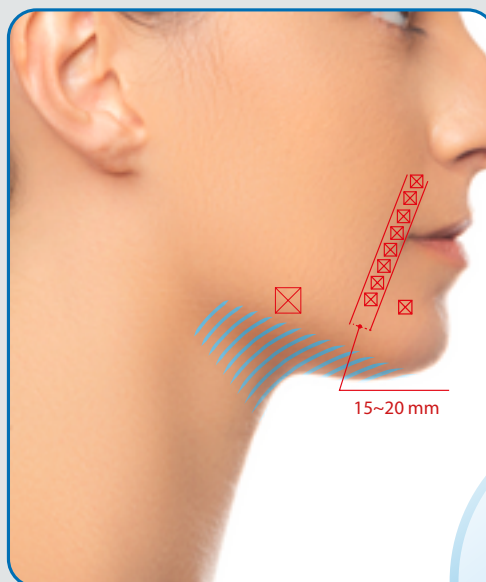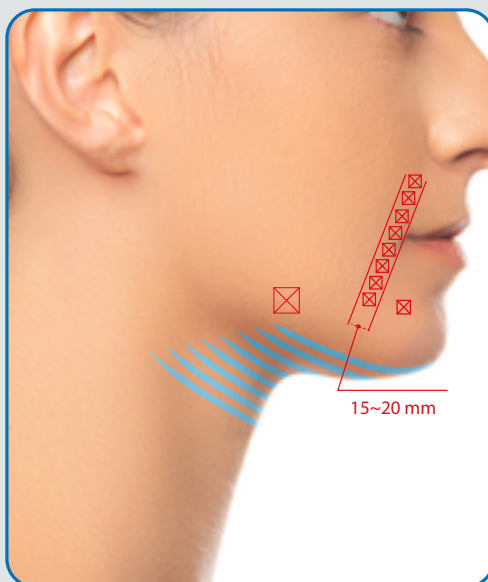

### Descrição

- A Caneta Liftera em regiões submandibulares, periorbitais e periorais oferecem **mais conforto** ao paciente e precisão na aplicação.
- Para individualizar e focar nas indicações de cada paciente, acompanhar a anatomia aplicando linhas paralelas e espaçadas de 5 mm.


### Atenção

- 1º Acoplar a Caneta Liftera na pele; 2º Iniciar o movimento; 3º Apertar o botão de disparo.
- Sempre movimentar a Caneta Liftera enquanto estiver disparando.
- Nunca deixar a Caneta Liftera parada em um mesmo local da pele enquanto dispara.
- Ao finalizar o vetor, soltar o botão e então remover a Caneta Liftera, para evitar a superficialização dos pontos de coagulação.
- Evitar sobreposição dos vetores.
- Em regiões menores e delicadas sugerimos utilizar uma frequência de disparo de 5 Hz.



**NÃO APLICAR EM DIREÇÃO AO GLOBO OCULAR**

# 3

## Protocolos




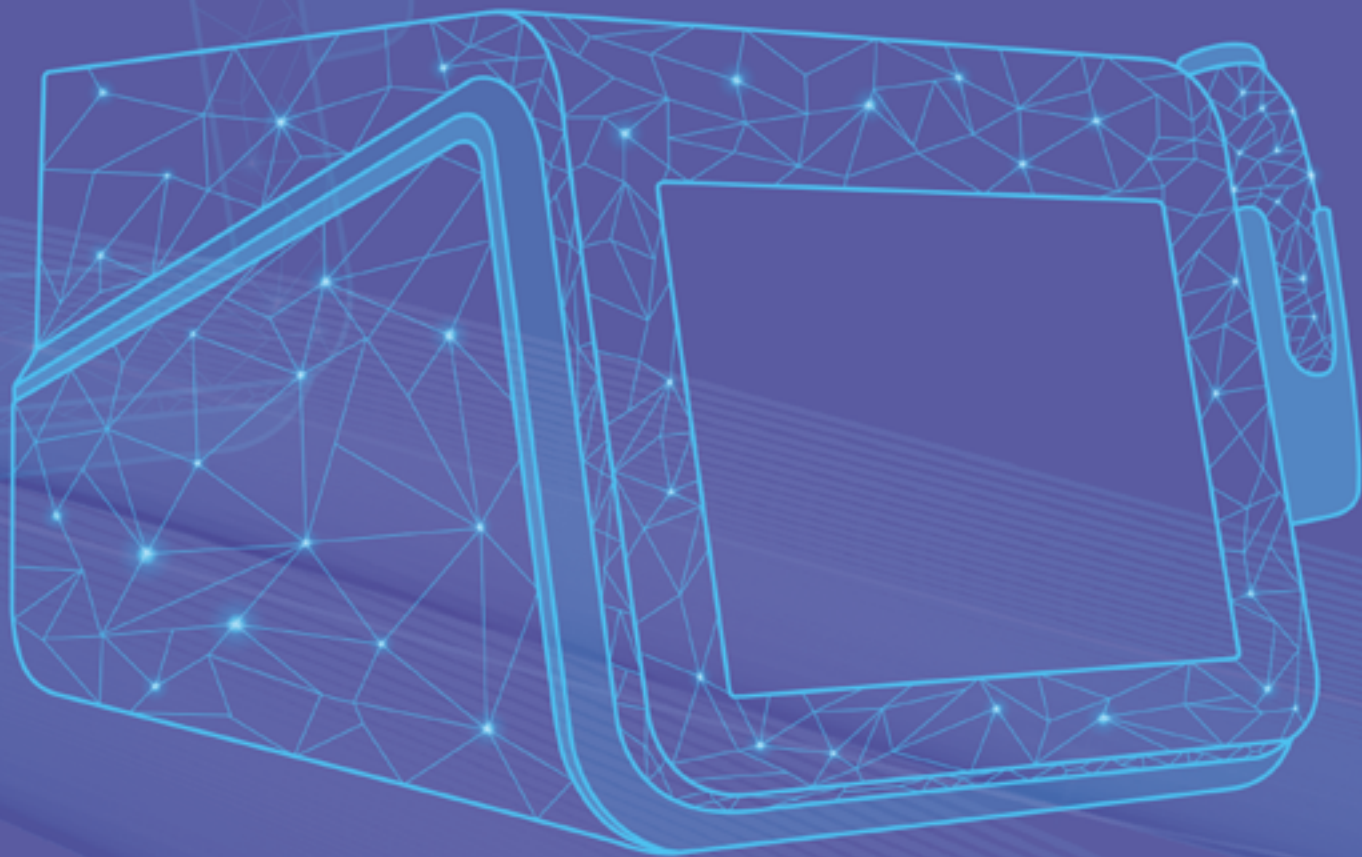


3.1 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | Full Face - Submandibular

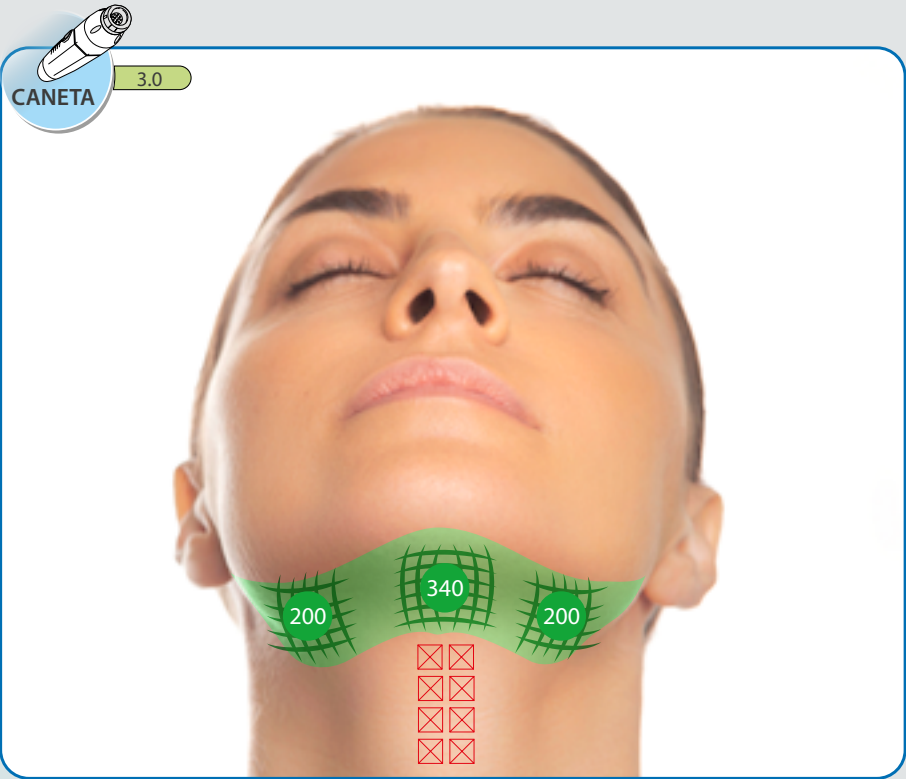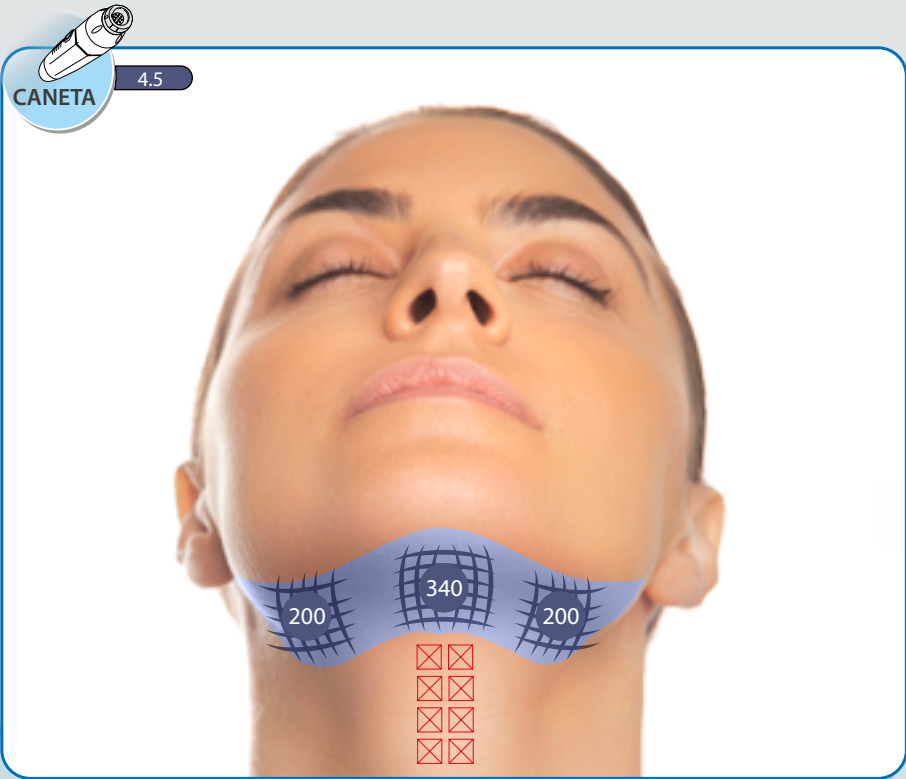

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|--------------|
| CANETA 4.5 | 0,7J     | 740          |
| CANETA 3.0 | 0,4J     | 740          |
|            |          | 1480         |

3.2 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | Full Face - Terço Inferior.

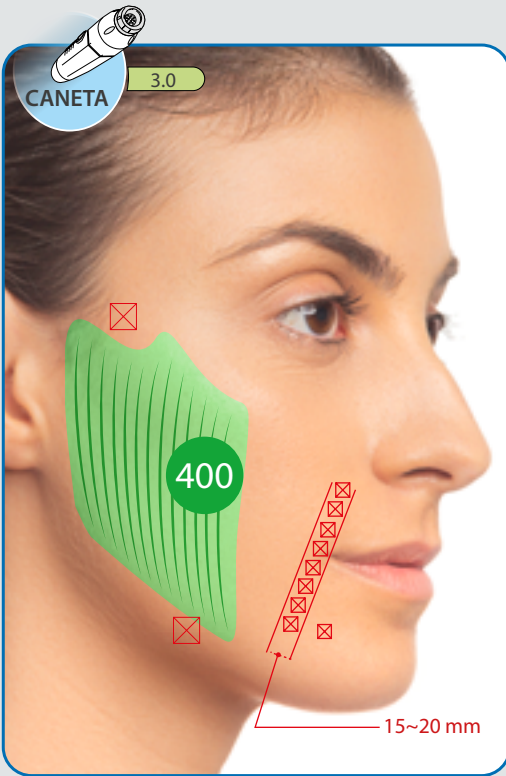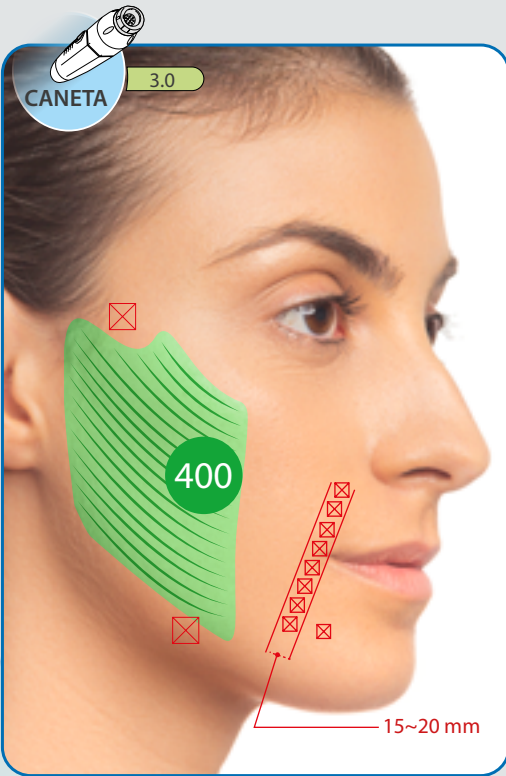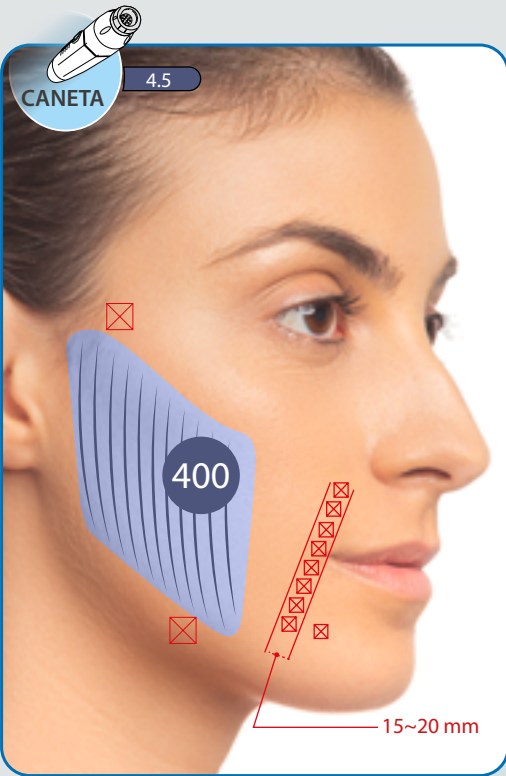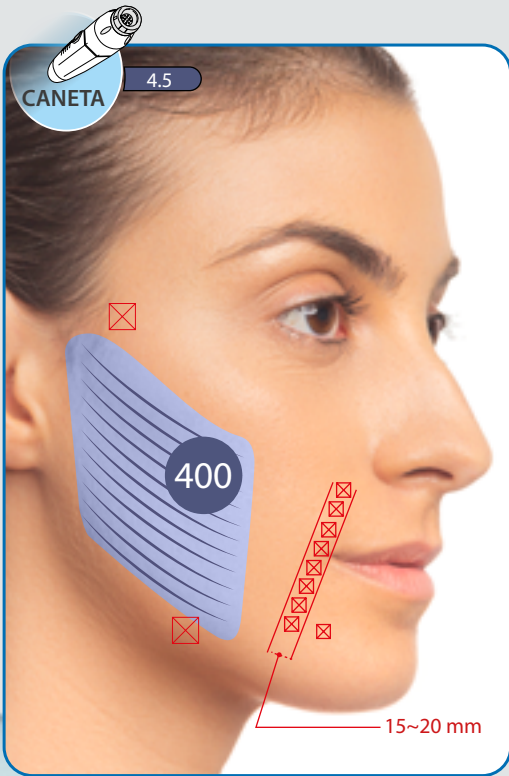


| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 4.5 | 0,7J     | 800       | 1600         |
| CANETA 3.0 | 0,4J     | 800       | 1600         |
| 3200       |          |           |              |

ÁREAS ANATÔMICAS







3.3 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | Full Face - Pálpebras e Terço Superior

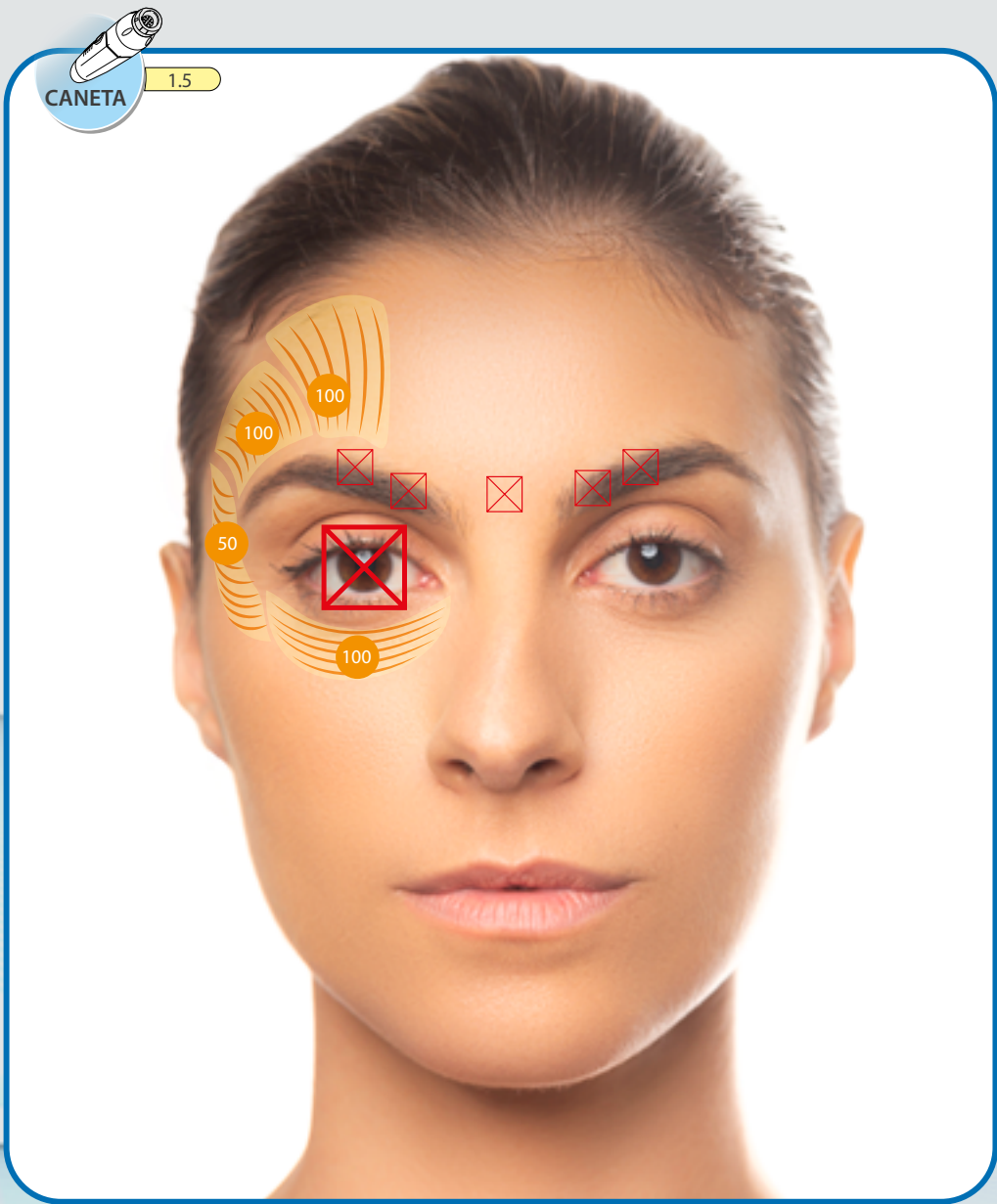

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 1.5 | 0,2J     | 350       | 700          |

NÃO APLICAR EM DIREÇÃO AO GLOBO OCULAR

3.4 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | 1/3 INFERIOR - Padrão (Full), flacidez e volume.

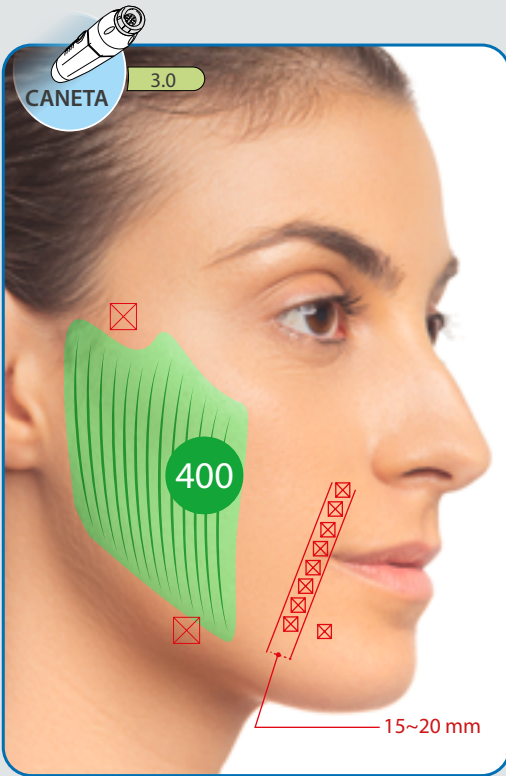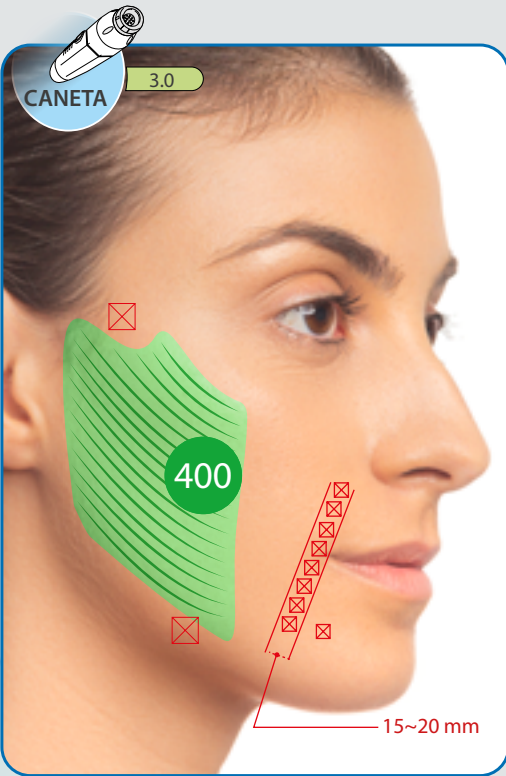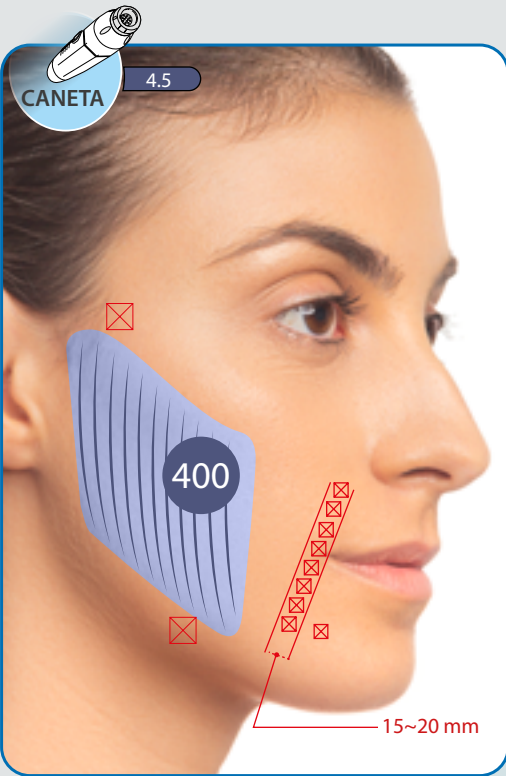
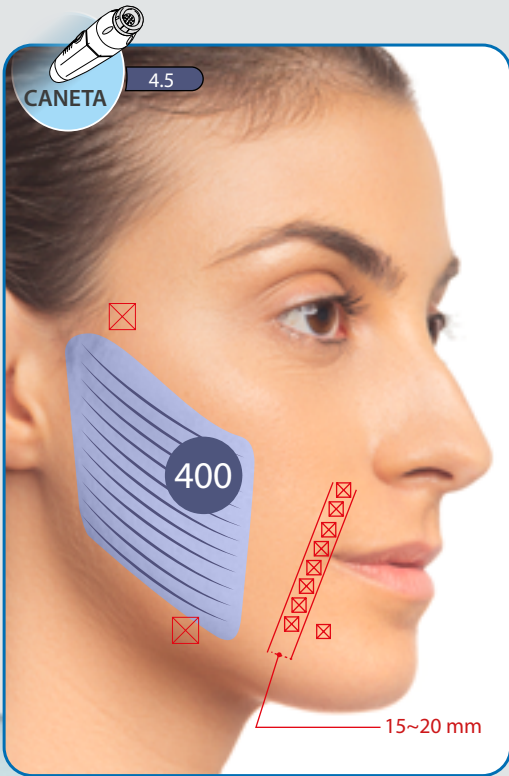


| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 4.5 | 0,7J     | 800       | 1600         |
| CANETA 3.0 | 0,4J     | 800       | 1600         |
| 3200       |          |           |              |

ÁREAS ANATÔMICAS




3.5 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | 1/3 INFERIOR - Preservar o volume do Zigomático Malar e Submalar.

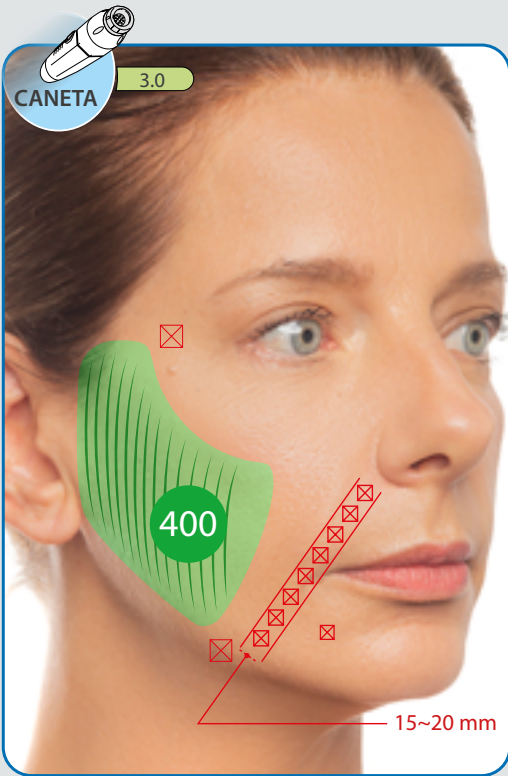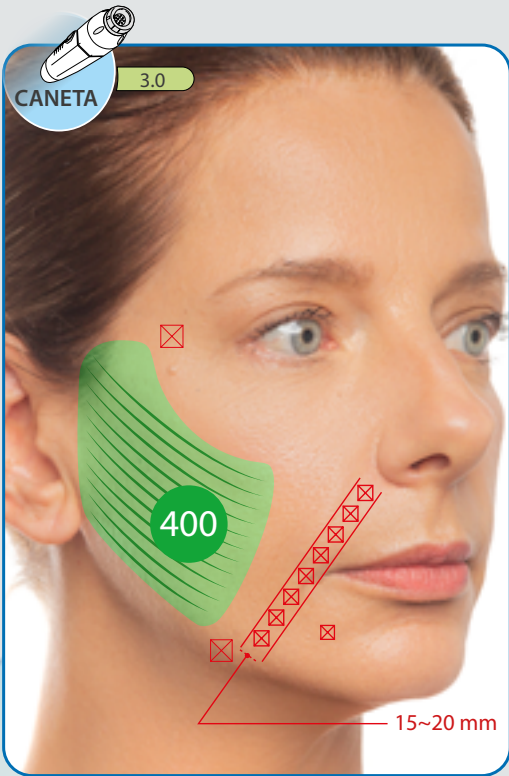



Paciente sem profundidade na face, não fazer aplicadores de 4,5 mm.  
Substituir por aplicadores de 3,0 mm e 1,5 mm.

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 4.5 | 0,7J     | 600       | 1200         |
| CANETA 3.0 | 0,4J     | 800       | 1600         |
| 2800       |          |           |              |

ÁREAS ANATÔMICAS

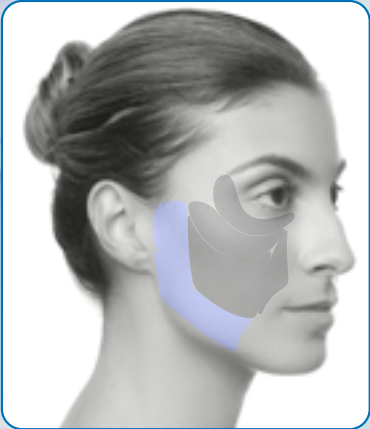

3.6 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | 1/3 INFERIOR - Sulco nasolabial - Flacidez / Gordura

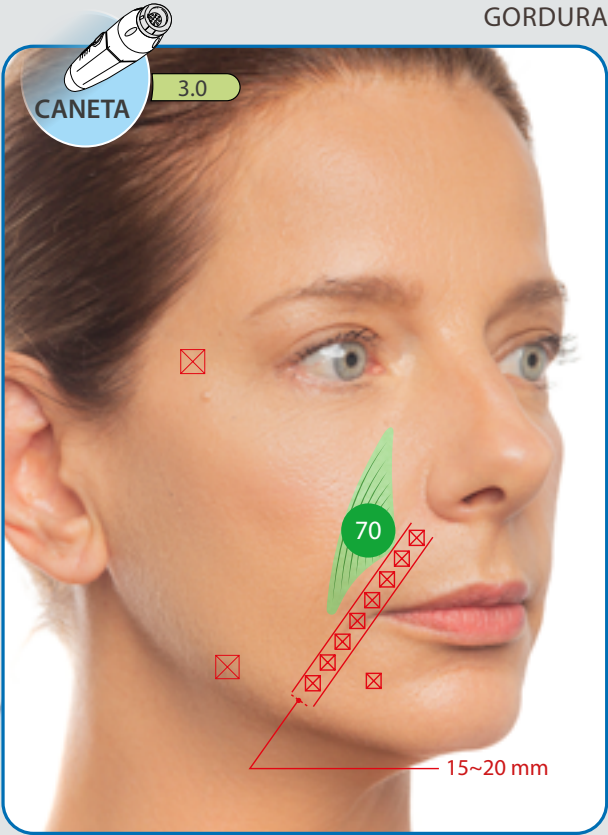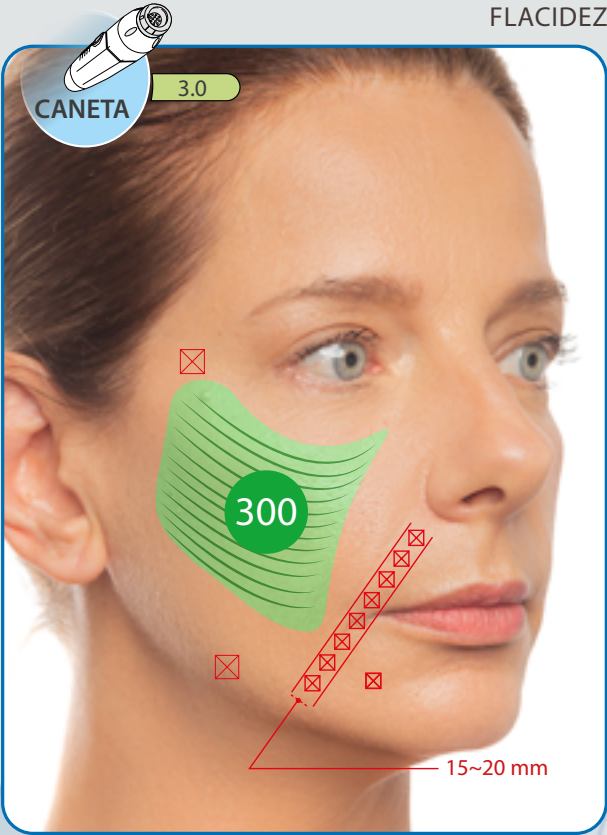


FLACIDEZ

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 3.0 | 0,4 J    | 300       | 600          |
| 600        |          |           |              |


GORDURA

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 3.0 | 0,4J     | 70        | 140          |
| 140        |          |           |              |

ÁREAS ANATÔMICAS

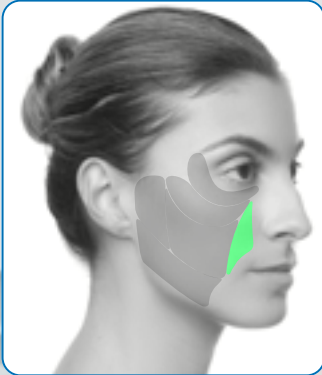


3.7 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | 1/3 SUPERIOR

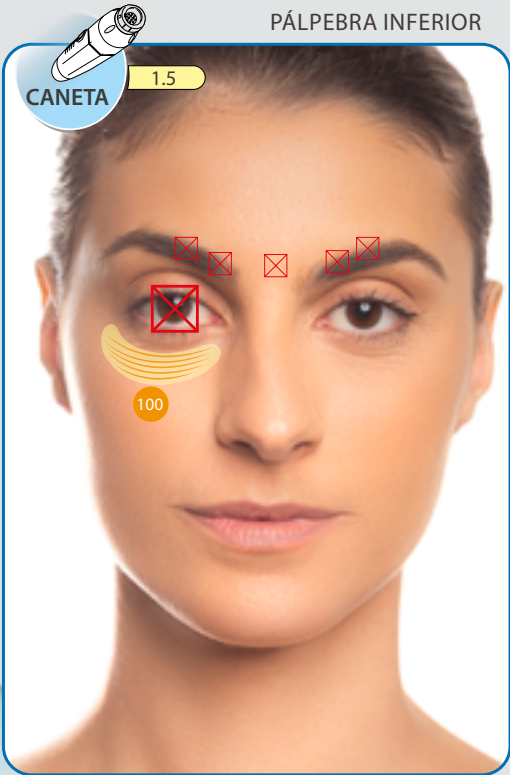


PÁLPEBRA INFERIOR

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 1.5 | 0,2J     | 200       | 200          |

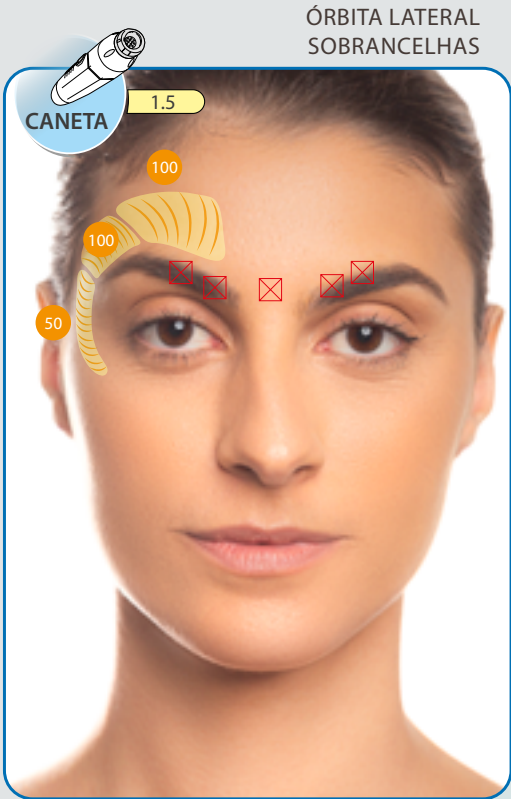

SOBRANCELHAS

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 1.5 | 0,2 J    | 200       | 400          |

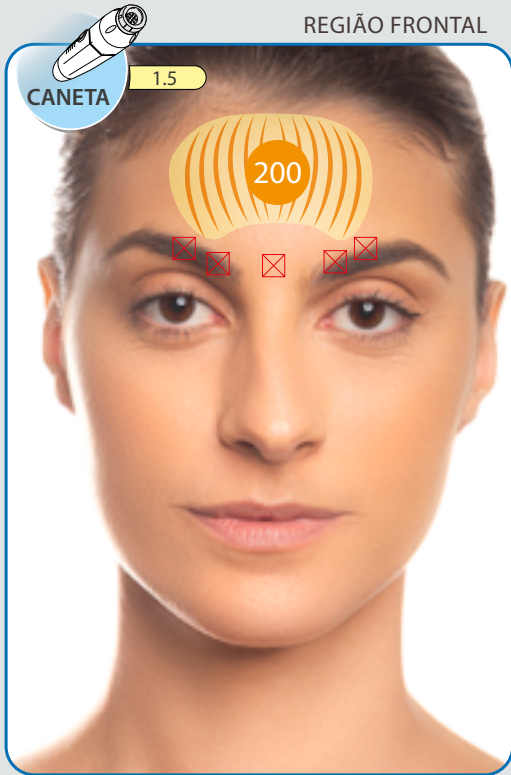

REGIÃO FRONTAL (EFEITO TOXINA)

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 1.5 | 0,2J     | -         | 200          |

NÃO APLICAR EM DIREÇÃO AO GLOBO OCULAR

ÓRBITA LATERAL

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | MEIA FACE | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|-----------|--------------|
| CANETA 1.5 | 0,2J     | 50        | 100          |





3.9 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | **PESCOÇO** - Somente Caneta Liftera.



| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|--------------|
| CANETA 3.0 | 0,4J     | 1600         |
| CANETA 1.5 | 0,2J     | 1600         |
|            |          | <b>3200</b>  |

3.10 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | COLO

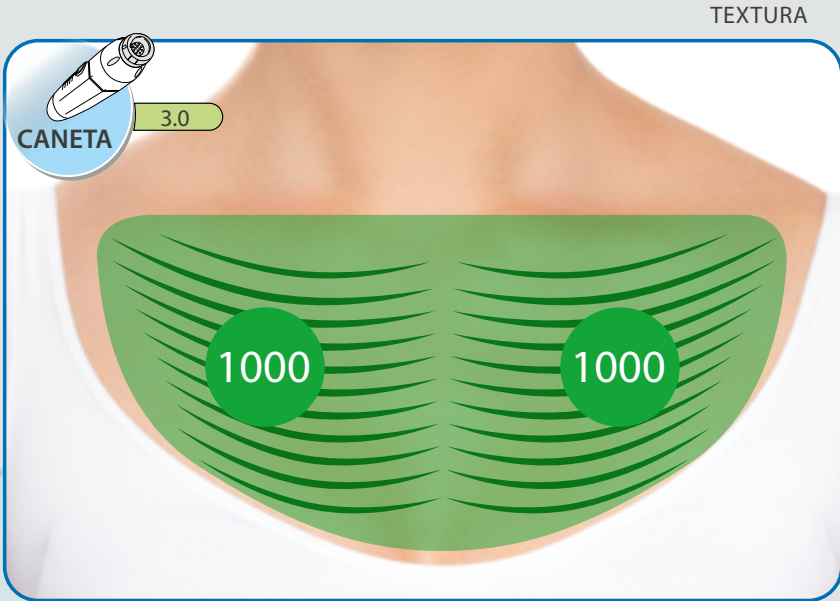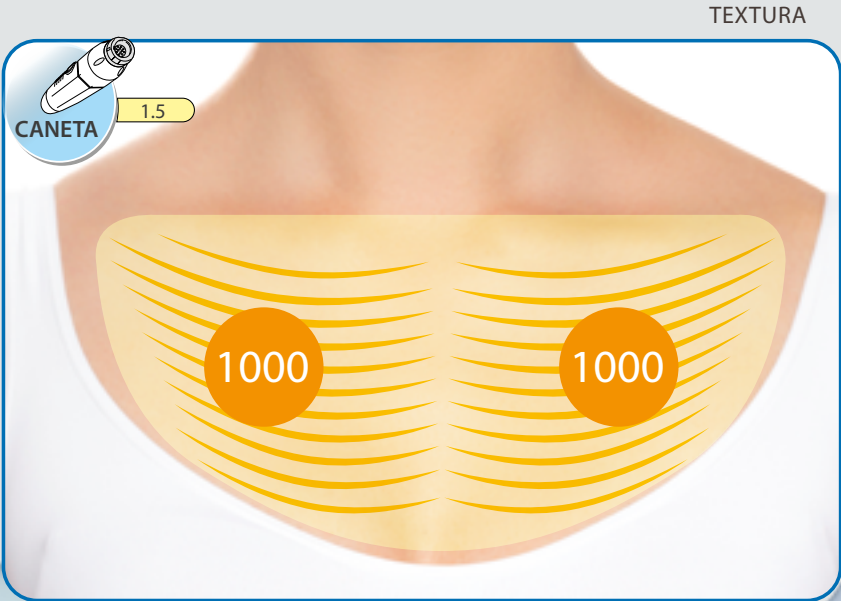

TEXTURA

| TRANSDUTOR | POTÊNCIA | TOTAL PONTOS |
|------------|----------|--------------|
| CANETA 3.0 | 0,4J     | 2000         |
| CANETA 1.5 | 0,2J     | 2000         |
|            |          | <b>4000</b>  |