

Protocolo **UltraDry**



Dra. Cris Arci

Avaliação da aplicação

- Pacientes com hiperidrose primária, moderada a severa, refratária aos tratamentos tópicos.
- Região da axila deve estar depilada e com a pele íntegra, sem sinais de infecção ativa.


Benefícios

Diminuição da severidade da hiperidrose axilar, com possibilidade de redução definitiva da sudorese.

Pontos de atenção

- Possíveis efeitos adversos: dor, sensibilidade e parestesia nas axilas e braços.
- Não é específico para a glândula écrina sudorípara.
- Mais estudos são necessários para avaliar segurança e efetividade a longo prazo.

Signature

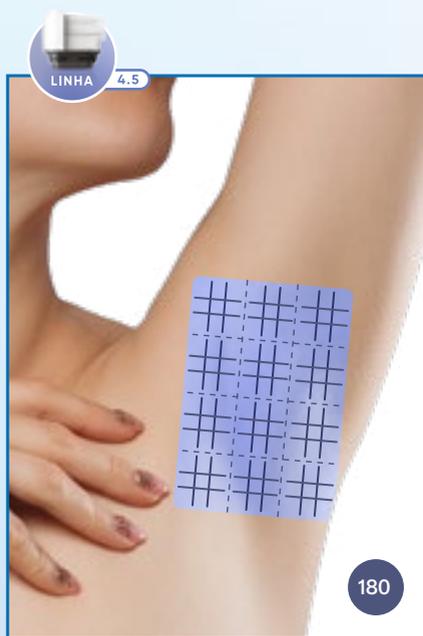

Transdutor	Level	Speed	Região	Total Linhas	Total Caneta
Linha 4.5	9-10J	-	7.5 x 10cm	180	-
Caneta 4.5	10J	10Hz	Maior sudorese Área evidenciada pelo teste de amido-iodo (teste de Minor).	-	1000
Linha 3.0	7J	-	7.5 x 10cm	180	-
Caneta 3.0	7J	10Hz	Maior sudorese Área evidenciada pelo teste de amido-iodo (teste de Minor).	-	1000
Total				360	2000

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.