

# Protocolo **Beauty Sculpt**



## Dr. Daniel Boro

### *Conceito*

Desenvolvido para atender pacientes que desejam afinar o nariz.

### *Descrição*

Essa aplicação foi pensada para uma abordagem minimamente invasiva e precisa, através da aplicação da tecnologia na ponta nasal. A caneta do Liftera 2 é muito precisa e o disparo com feixe direcionado permite tratar áreas como pálpebra, nariz e lábios. Canetas sem foco pontual, e que tenham o foco circunferencial não conseguem entregar a mesma precisão.

### *Avaliação da aplicação*

O paciente deverá conter as seguintes características para indicação de tratamento.

Ponta bulbosa devido ao tecido seboreico e na região do SMAS nasal.


### *Benefícios*

Melhoria da qualidade da pele, compactação do SMAS, compactação da derme e alguns anexos, redução da oleosidade devido a compactação de tecidos moles, afinamento do nariz.

### *Pontos de atenção*

Pacientes que tenham narizes de ponta bulbosa devido ao tecido cartilaginoso, não são indicados para o procedimento. O tratamento visa ser super preciso, por isso a indicação para trabalhar na frequência de 05Hz e evitar possíveis complicações.

O dorso do nariz, não deverá receber aplicação.

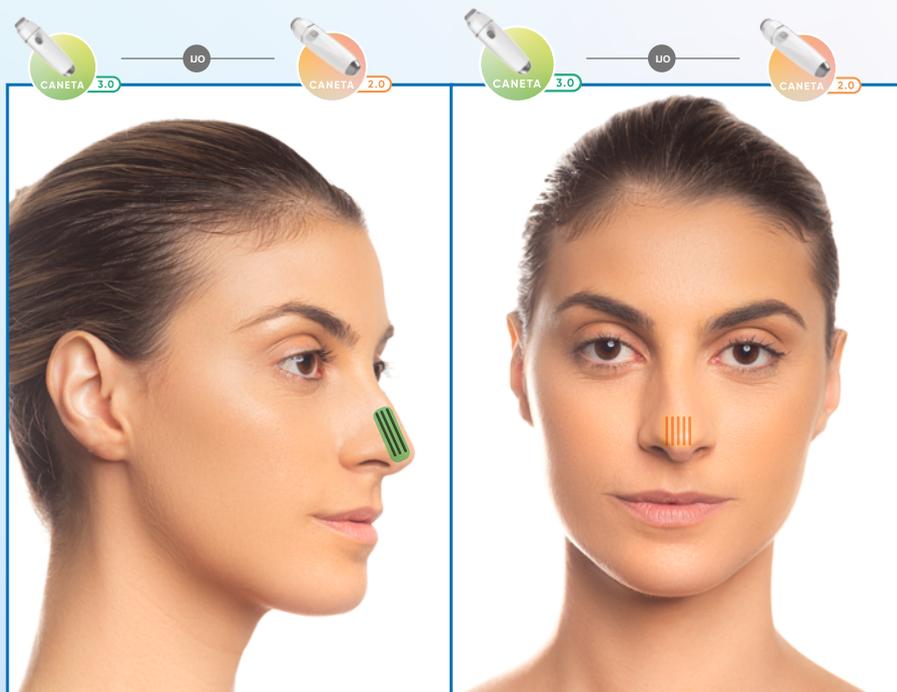

\*Atenção – trabalhar somente em ponta nasal

Transdutor	Level	Speed	Região	Movimento	Total Caneta
Caneta 3.0	2 - 4J	5 Hz	Lateral	Linear	50 - 70
Caneta 3.0	2 - 4J	5 Hz	Dorso	Linear	40
Caneta 3.0	2 - 4J	5 Hz	Geral	Circular	50
					<b>200-300</b>



\*Atenção – trabalhar somente em ponta nasal

Transdutor	Level	Speed	Região	Movimento	Total Caneta
Caneta 2.0	2 - 4J	5 Hz	Lateral	Linear	50 - 70
Caneta 2.0	2 - 4J	5 Hz	Dorso	Linear	40
Caneta 2.0	2 - 4J	5 Hz	Geral	Circular	50
					<b>200-300</b>

**!** Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

\* A caneta de 2.0 é indicado para pele fina e a caneta de 3.0 para pele mais espessa.

\*\* O número total de disparos pode variar de 200 a 300, dependendo da extensão da área a ser tratada.