

# Protocolo **Lift O Shot**



## Dra. Daniela Ribeiro

### *Conceito*

Técnica minimamente invasiva que visa melhorar o prazer sexual, estimulando a neovascularização e neocolagênese. Além de melhorar a sensibilidade da inervação de toda região clitoriana.

### *Descrição*

A utilização do Liftera 2 permite trabalhar áreas sensíveis e delicadas com entrega de energia precisa especificamente nas camadas desejadas.

### *Avaliação da aplicação*

A aplicação foi desenvolvida para pacientes que tenham disfunção orgásmica sem causa aparente especialmente típicas do envelhecimento ou climatério.

### *Benefícios*

Orgasmos mais intensos e facilitados.

### *Pontos de Atenção*

Somente está indicado o uso de ponteiras superficiais com transdutor caneta. Realizar movimentos lineares com potências sempre baixas.


*Signature*

Liftera®

Assinado por

**Dra. Daniela Ribeiro**

Protocolo  
**Lift O Shot**

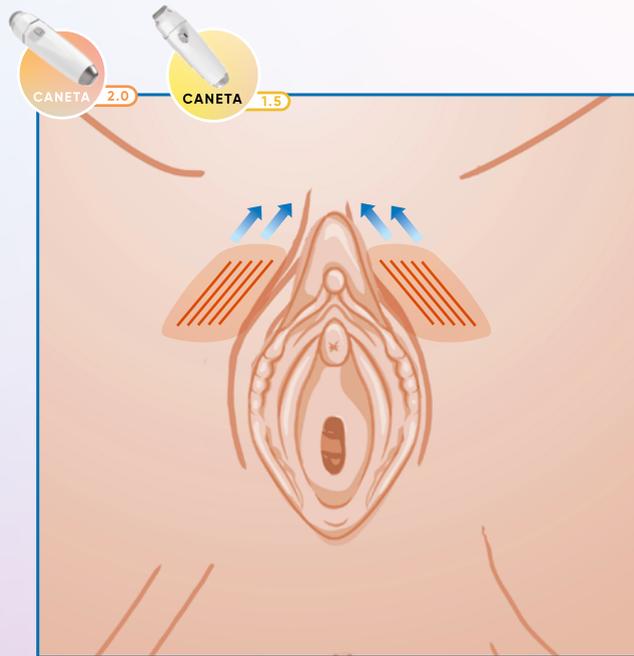


| Transdutor | Level | Speed | Cada lado    | Total Caneta |
|------------|-------|-------|--------------|--------------|
| Caneta 2.0 | 2J    | 7Hz   | 50           | 100          |
| Caneta 1.5 | 2J    | 7Hz   | 50           | 100          |
|            |       |       | <b>Total</b> | <b>200</b>   |

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

*Signature*

Liftera®

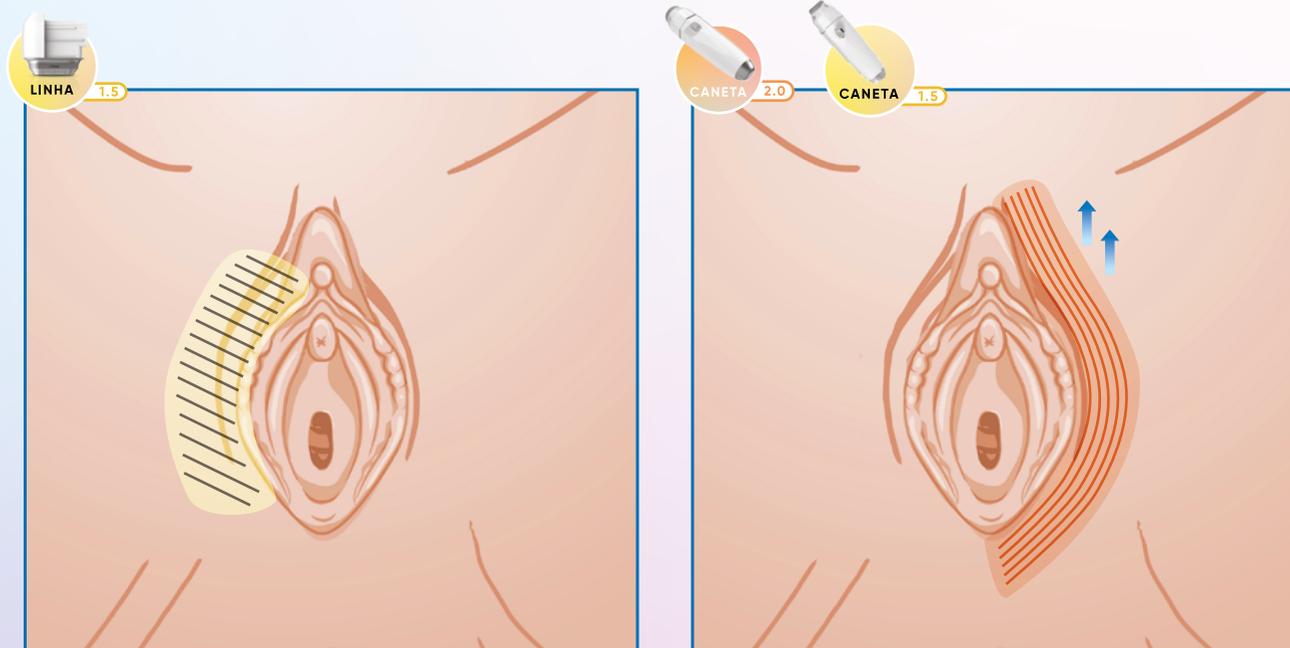

| Transdutor | Level | Speed | Cada lado    | Total Linhas | Total Caneta |
|------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Linha 1.5  | 4J    | 5Hz   | 35           | 70           | -            |
| Caneta 2.0 | 4J    | 5Hz   | 250          | -            | 500          |
| Caneta 1.5 | 4J    | 5Hz   | 250          | -            | 500          |
|            |       |       | <b>Total</b> | <b>70</b>    | <b>1000</b>  |

**!** Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Complemento para tratamento da flacidez de vulva.