

# Protocolo Lift Face



## Dra. Livia Sabia

### *Conceito*

Sustentação Facial:

- Lifting temporal
- Diferentes profundidades e energias de aplicação

### *Descrição*

O protocolo foi desenvolvido para utilização de diferentes transdutores linha para obtenção de efeito lifting facial. Linha vertical de 4.5 e 3.0mm ou 3.0 e 1.5mm cruzando com aplicação linear da porção posterior ao sulconasogeniano em direção temporo-parietal na técnica utilizada.

### *Avaliação da aplicação*

Evitar aplicadores com profundidade maior que 3.0mm na região temporal.

Em pacientes com rosto mais magro diminuir ou evitar disparos com transdutor 4.5mm.



Evitar aplicações com os aplicadores acima de 1.5mm na região pré-auricular.

### *Benefícios*

- Sustentação facial
- Abertura do olhar
- Suavização do Jowl
- Definição da linha da região malar

*Signature*

Liftera®

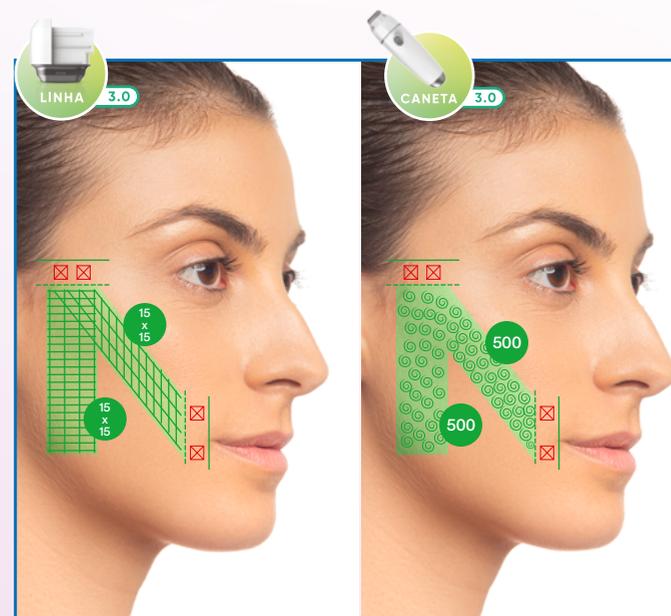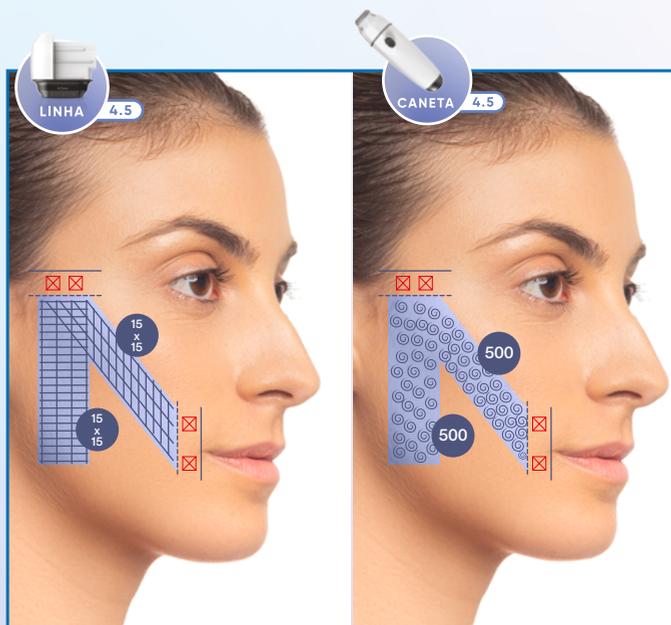


Transdutor	Level	Meia Face	Total Linhas	Total Caneta
Linha 4.5	7 - 10J	60	120	-
Caneta 4.5	7 - 10J	1000	-	2000
		<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>2000</b>

Transdutor	Level	Meia Face	Total Linhas	Total Caneta
Linha 3.0	7J	60	120	-
Caneta 3.0	7J	1000	-	2000
		<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>2000</b>

**!** Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Caneta Liftera "Point Lift" em movimentos circulares e cruzados na vertical e horizontal

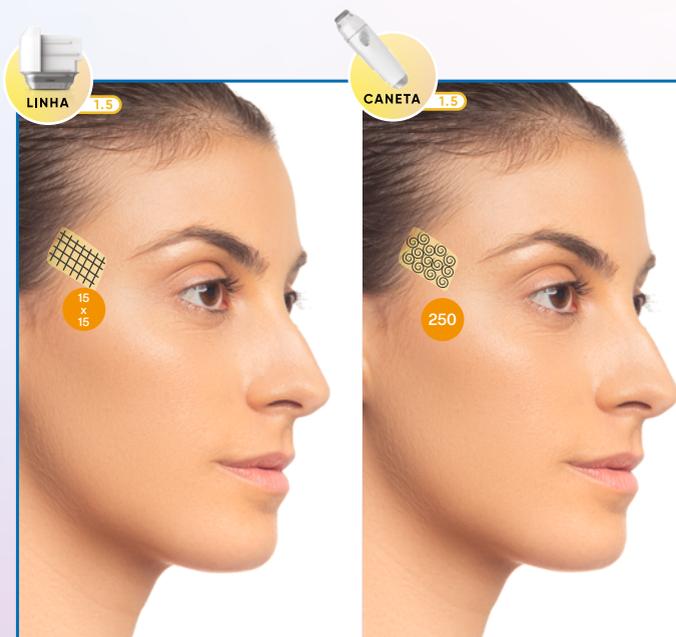

Transdutor	Level	Meia Face	Total Linhas	Total Caneta
Linha 1.5	5J	30	60	-
Caneta 1.5	5J	250	-	500
	<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>500</b>

Na região temporal com aplicador 1.5mm e circulares com a "Point Lift" de 1.5mm