

Protocolo MV Lift



Dra. Mariana Veloso

Conceito

Tratamento de pacientes que tenham perfil “heavy face” e que buscam efeito lifting através de um protocolo minimamente invasivo, preciso e indolor.

Descrição

O Liftera 2 traz muita segurança na aplicação, além de possibilitar o tratamento das três camadas da pele e com energias diferentes permitindo personalizar o tratamento de cada paciente.

Avaliação da aplicação


Pacientes com perfil “heavy face” ou com face de perfil obeso que apresentem flacidez de leve a moderada. E que queiram tratar além da flacidez, a gordura trabalhando pró aging como um todo.

Benefícios


Melhora da qualidade de pele, flacidez. Possibilidade de desenhar a face e levantar o olhar.

Pontos de atenção

- Bom diagnóstico da face do paciente para indicar o protocolo corretamente.
- Domínio do equipamento para não causar intercorrências.
- Entendimento da anatomia para correta seleção dos transdutores.

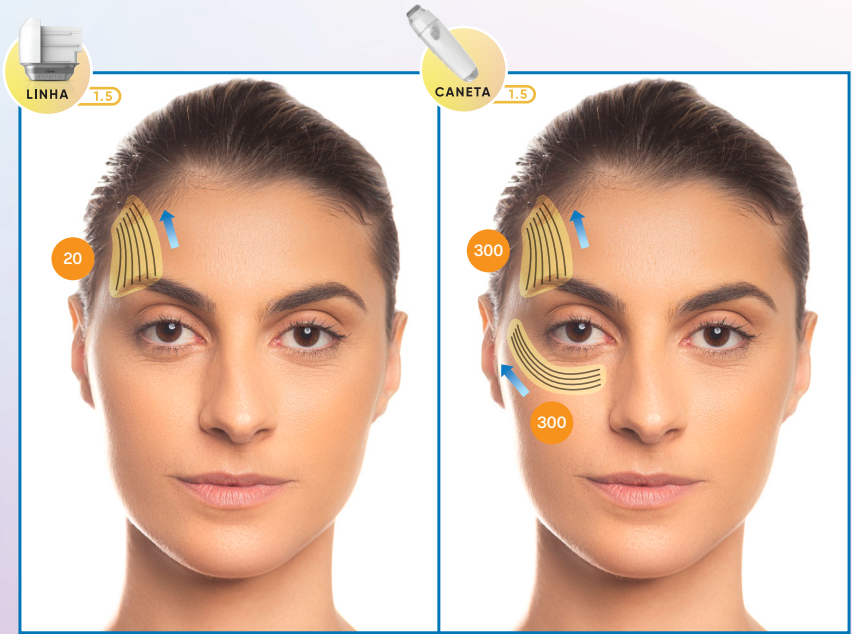


Transdutor	Level	Meia Face	Total Linhas	Total Caneta
Linha 1.5	5J	20	40	-
Caneta 1.5	5J	600	-	1200
		Total	40	1200

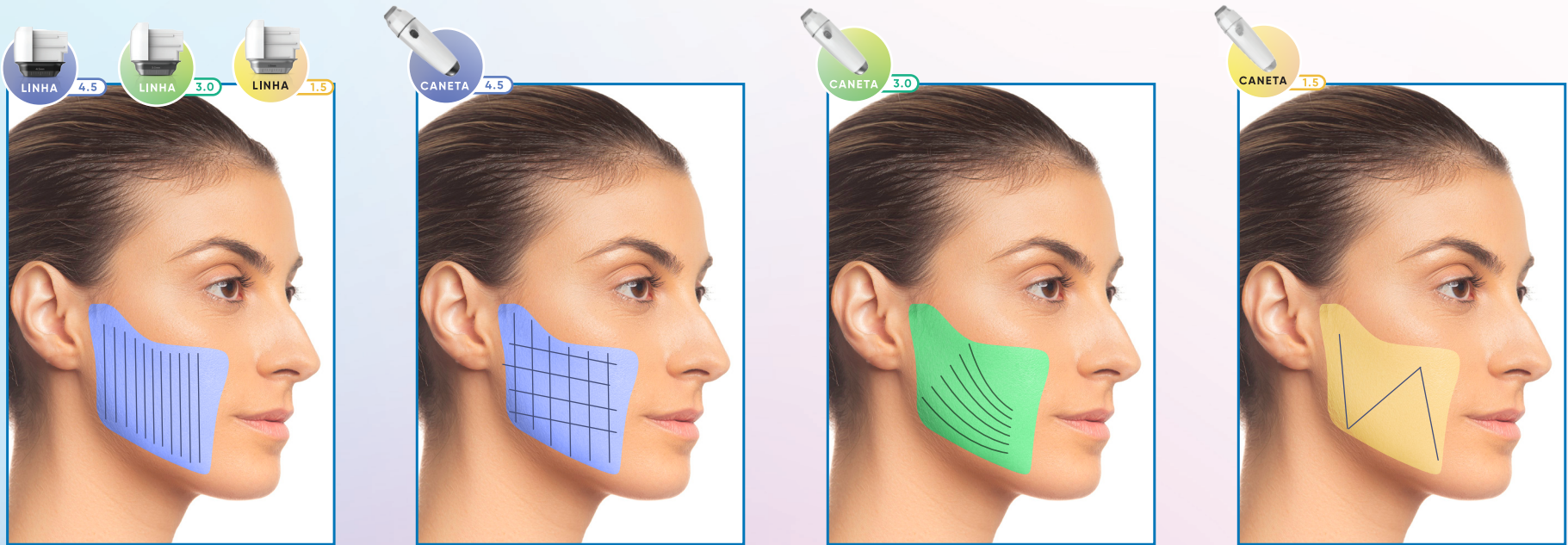

Transdutor	Level	Região	Meia Face	Total Linhas	Total Caneta
Linha 4.5	10J		50	100	-
Caneta 4.5	10J		600	-	1200
Linha 3.0	7J		60	120	-
Caneta 3.0	7J		600	-	1200
Linha 1.5	5J		60	120	-
Linha 1.5	5J	Perioral	200	400	-
Caneta 1.5	5J		600	-	1200
			Total	1820	2520

 Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Na região temporal com aplicador 1.5mm e circulares com a “Point Lift” de 1.5mm

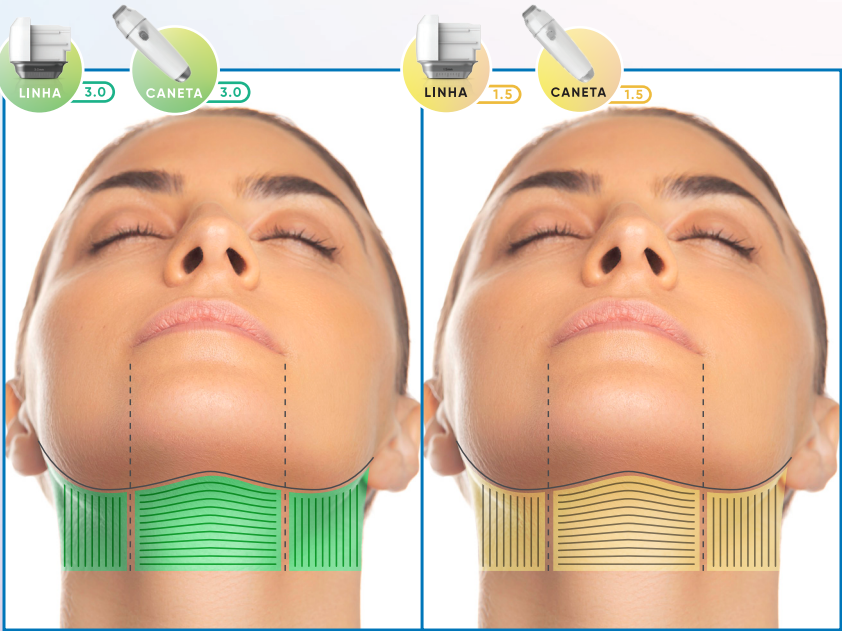

Transdutor	Level	Região	Meia Face	Total Linhas	Total Caneta
Linha 3.0	7J	Central da Papada	25	50	-
Caneta 3.0	7J	Central da Papada	150	-	300
Caneta 3.0	7J	Lateral da Papada	300	-	600
Linha 1.5	5J	Central da Papada	25	50	-
Caneta 1.5	5J	Central da Papada	150	-	300
Caneta 1.5	5J	Lateral da Papada	300	-	600
			Total	100	1800