

Protocolo Man 3D Definition



Dra. Marina Barletta

Conceito

Protocolo desenvolvido para público masculino devido ao aumento da demanda de homens que buscam rejuvenescimento de forma natural.

Descrição

Protocolo criado baseado na experiência de tratamento com público masculino que busca definição de contorno facial e melhora da flacidez com naturalidade seguindo os traços de beleza masculina.

Avaliação da aplicação


Pacientes masculinos são indicados.

Benefícios




Com este protocolo o médico conseguirá obter resultados de lift e definição da face masculina para criar uma fidelização do público masculino aos procedimentos estéticos.

Pontos de atenção


Ângulo da mandíbula, área dos olhos e tônus muscular. Objetivo: linha mandibular marcada, olhar mais descansado e rejuvenescido e firmeza de pele. As sobrancelhas devem manter a característica masculina de formato horizontal. Evitar disparos em sentido angulado na região malar, o sentido deve ser horizontal.

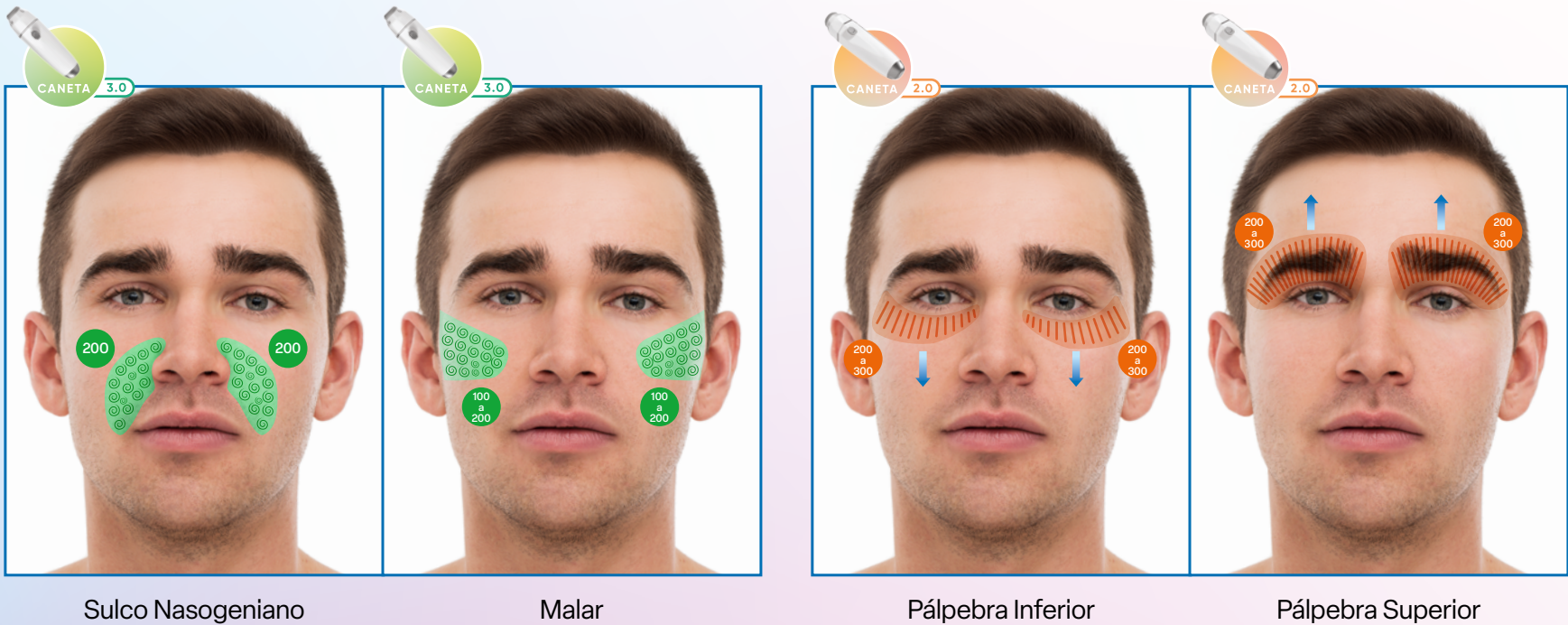

Transdutor	Level	Speed	Região	Meia Face	Total Caneta
Caneta 3.0	4J	-	Sulco Nasogeniano	200	400
Caneta 3.0	4J	-	Malar	100-200	200-400
Caneta 2.0	4J	-	Pálpebra Inferior	200-300	400-600
Caneta 2.0	4J	-	Pálpebra Superior	200-300	400-600
				Total	1400-2000

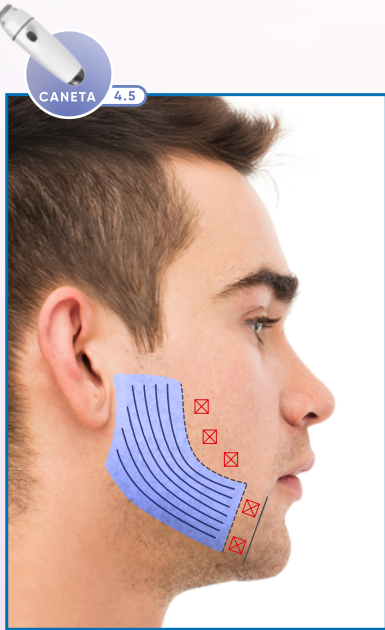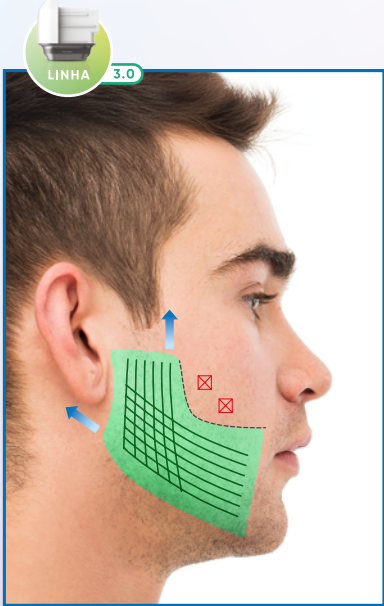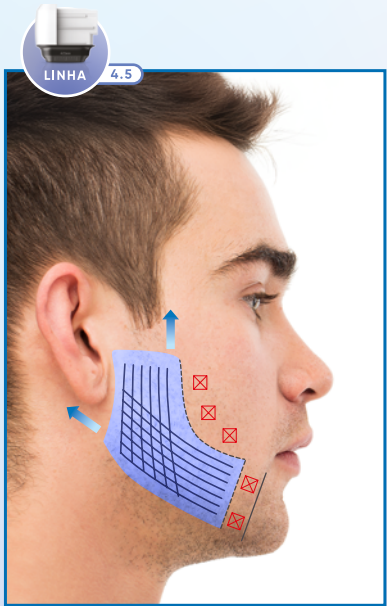

Transdutor	Level	Meia Face	Total Linhas	Total Caneta
Linha 4.5	11J	39	78	-
Caneta 4.5	11J	200	-	1200
Linha 3.0	6J	39	78	-
Caneta 3.0	7J	400	-	800
		Total	156	2000

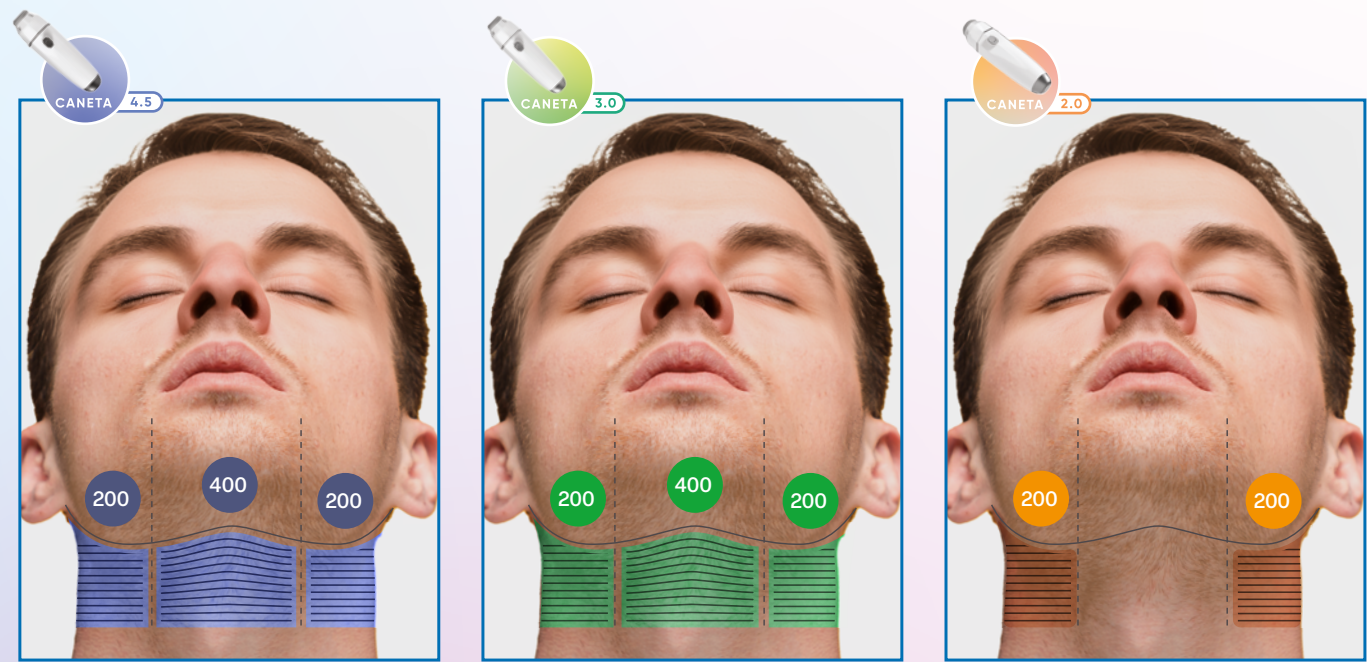

Transdutor	Level	Speed	Submento ou Mandíbula	Total Caneta
Caneta 4.5	11J	-	200/400/200	800
Caneta 3.0	5J	-	200/400/200	800
Caneta 2.0	2J	-	200/200	400
			Total	2000