

# Protocolo Mamas Up



## Dra. Natalie Borelli

### *Conceito*

Desenvolvido para pacientes que tenham resistência à procedimentos cirúrgicos, mas que desejam obter um efeito lifting na região.

### *Descrição*

A aplicação foi pensada para ser realizada com movimentos de vetores e o transdutor de caneta para que a técnica possa ser flexível e personalizável de acordo com o paciente. O tratamento deve ser realizado sempre no quadrante superior, evitando os tecidos mamários.

### *Avaliação da aplicação*


Pacientes que estejam com flacidez na região das mamas e que desejam um efeito lifting são indicados para o tratamento. Mesmo aqueles que tenham passado por procedimento cirúrgico.

### *Benefícios*

- Efeito lifting alcançável com uso somente do Liftera. Possibilidade de individualizar o tratamento por paciente, com o uso do transdutor caneta.
- Facilidade na aplicação e possibilidade de vetorizar os movimentos.
- Conforto ao paciente.

### *Pontos de atenção*

- Há provável necessidade de associação com outras técnicas e tecnologias como uso de bioestimuladores e de sessões adicionais dependendo do resultado desejado.
- O transdutor de linha também pode ser utilizado.

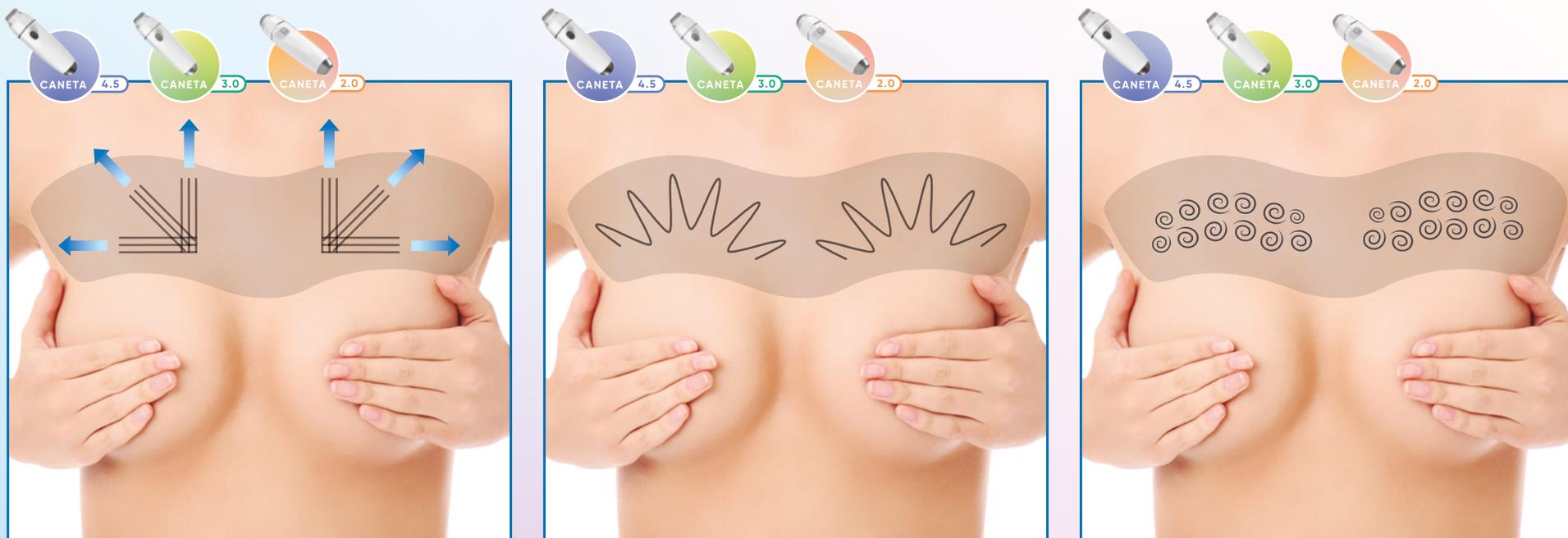

| Transdutor | Level | Região   | Total Linha  | Total Caneta |
|------------|-------|--|--------------|--------------|
| Caneta 4.5 | 11J   | Toda região circundante, evitando tecidos mamários | -            | 1800         |
| Caneta 3.0 | 7J    | Toda região circundante, evitando tecidos mamários | -            | 6000         |
| Caneta 2.0 | 4J    |  | -            | 3000         |
|            |       | <b>Total</b>                                       | <b>10-20</b> | <b>10800</b> |

**!** Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.