

# Coolfase™

A **beleza** que evolui.

#StayCoolStayAhead



Tecnologia de radiofrequência monopolar mais avançada com resfriamento por contato direto digital e patenteado.



# Por que **Coolfase?**

A tecnologia de RF monopolar mais avançada  
com resfriamento direto na tip



Tratamento não invasivo para firmeza  
e contorno da pele



Resultados excelentes mesmo com um  
único tratamento



Controle eficiente da dor pela  
tecnologia Direct Cooling™



Pouco ou nenhum tempo de  
inatividade (downtime)



Resultados melhorados e duradouros




Diferentes modelos de tip para várias  
áreas de tratamento



- ✓ Tips para múltiplas utilizações  
- 3.000 disparos por tip
- ✓ 3 modelos diferentes de tip por aplicação  
- facial, periocular e corporal
- ✓ Potente resfriamento direto por micro-refrigerador embutido
- ✓ Design ergonômico da handpiece: leve e pequeno
- ✓ Interface de usuário extremamente simples e intuitiva
- ✓ Potência máxima de 140w
- ✓ RF monopolar com frequência de 6,78 MHz
- ✓ Profundidade máxima de até 3mm

## Resfriamento da superfície da pele por contato direto (DCC™)

Coolfase é a primeira tecnologia de RF monopolar do mundo, com patente, com um design termodinâmico super inovador. A tecnologia DCC™ é implementada no cartucho de uma forma ergonômica.

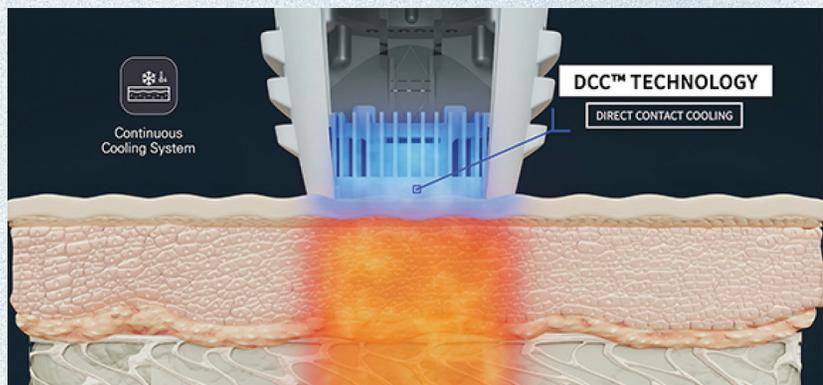

O módulo de microrefrigeração está integrado a Tip, resfriando a área de contato do aplicador com a pele por condução térmica. Trata-se de uma patente desenvolvida pela Asterasys.

Os cartuchos Coolfase™ resfriam a superfície da pele com base na tecnologia de resfriamento por contato direto (DCC™), o que reduz o nível de dor durante o tratamento de RF monopolar. Sendo assim, o tratamento pode ser realizado com um nível mais alto de energia, proporcionando melhores resultados.



# Coolfase™

⏻ POWERED BY ENTERA

Oferecer aos seus pacientes uma tecnologia que vai além dos tratamentos convencionais, redefinindo a maneira como lidamos com o rejuvenescimento e cuidados com a pele. Coolfase™ não é apenas mais uma inovação – é um marco na dermatologia estética, onde a ciência encontra resultados visíveis e naturais, de uma forma segura e personalizada.

---

Inovar é mais do que seguir tendências,  
é reescrever o futuro da pele.

### **Atendimento Personalizado**

O Coolfase™ oferece versatilidade para atender desde casos leves até os mais complexos, adaptando-se às necessidades individuais de cada paciente. Seja para áreas maiores, com a tip corporal, ou para regiões mais delicadas, como ao redor dos olhos, utilizando a tip menor.

### **Diferenciação no Mercado**

Uma abordagem inovadora para tratar flacidez, estimular a produção de colágeno e melhorar a qualidade da pele, graças a uma tecnologia patenteada e de última geração.

### **Retorno Financeiro**


A alta satisfação dos pacientes e a eficácia dos tratamentos aumentam o fluxo de pacientes recorrentes, proporcionando um excelente retorno sobre o investimento e mantendo baixos os custos operacionais da clínica.

### **Suporte Completo**

Além da tecnologia, oferecemos treinamento e suporte contínuo para garantir que você e sua equipe estejam preparados para tirar o máximo proveito do Coolfase™ desde o primeiro dia.

VÁRIOS POSSIBILIDADES DE USO

# Tips

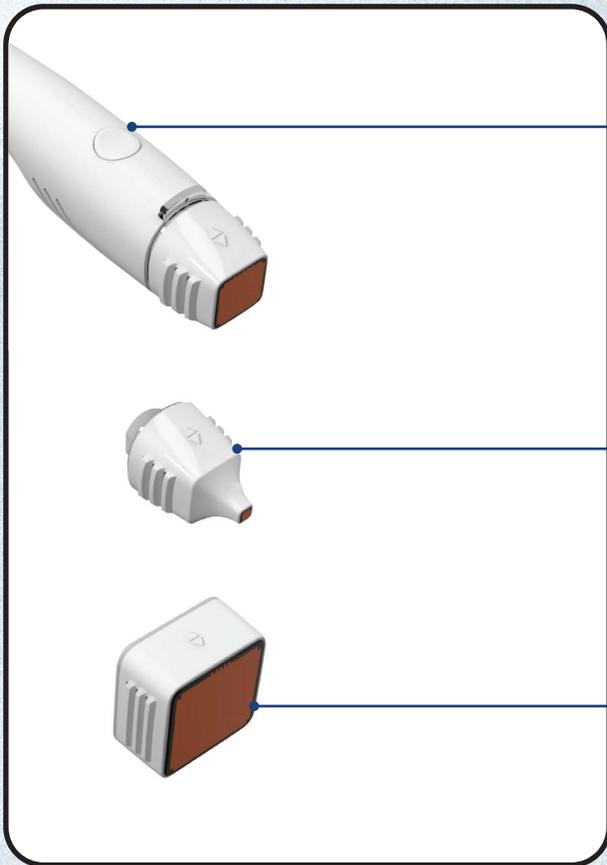

## Tip facial

20 x 20 mm (4 cm<sup>2</sup>)

## Tip para olhos

5 x 5 mm (0,25 cm<sup>2</sup>)

## Tip corporal

40 x 40 mm (16 cm<sup>2</sup>)

SIMPLES E INTUITIVO

# Interface do usuário



- 10 níveis ajustáveis de potência de RF
- 5 níveis ajustáveis de temperatura de resfriamento
- Energia por disparo e energia total exibidas



- Fácil configuração dos fundamentos da operação
- Volume de som ajustável
- Tela bloqueio fornecida
- Histórico de tratamento fornecido.

TECNOLOGIA

# Handpiece

## Handpiece

- Design ergonômico
- Tamanho ideal para fácil aderência
- Muito Leve



Disparo seguro por interruptor mecânico de pressão com detecção de impedância

## Tip

- Disparo seguro por interruptor mecânico de pressão com detecção de impedância
- Resfriamento direto integrado por microrefrigerador embutido.

## Micro-refrigerador

- 1) Level 1: 20°C ± 2°C
- 2) Level 2: 18°C ± 2°C
- 3) Level 3: 16°C ± 2°C
- 4) Level 4: 14°C ± 2°C
- 5) Level 5: 5°C ± 2°C

## Área de tratamento (área de resfriamento)

### Verificação de temperatura

- Azul: Abaixo de 25°C
- Verde: 25°C a 30°C
- Amarela: 30°C a 35°C
- Vermelho: Acima de 35°C
- 39°C: Modo de segurança ativado (uso restrito)



# Coolfase™

⏻ POWERED BY ENTERA

## Especificação do Coolfase Direct

Modelo	Coolfase Direct
Tipo de produto	RF monopolar
Frequência	6,78 MHz
Potência de RF	Máx. 140w
Faixa de impedância	75 a 400 $\Omega$
Cartuchos	Tip facial: 20 x 20mm (4cm <sup>2</sup> )
	Tip para olhos: 5 x 5 mm (0,25 cm <sup>2</sup> )
	Tip corporal: 40 x 40 mm (16 cm <sup>2</sup> )
Fonte de alimentação nominal	Bivolt (100 a 240), 50/60 Hz

\*A definir. Alguns valores nas especificações podem ser alterados pelo resultado dos procedimentos de certificação.

\*Leia as precauções e instruções antes de usar.