

Protocolo CoreAxis Concept



Dr. Francisco Diego Alencar

Conceito

O CoreAxis Concept é uma técnica exclusiva criada para o tratamento da flacidez cutânea e para a lipólise seletiva dos depósitos de gordura localizada, especialmente em pacientes submetidos ao emagrecimento acelerado com agonistas de GLP-1 e GIP.

Apesar de transformarem o manejo da obesidade, essas terapias frequentemente resultam em flacidez significativa e em desarmonia do contorno corporal, fatores que comprometem a autoestima e a qualidade de vida.

A técnica foi desenvolvida para responder a essa lacuna clínica, oferecendo uma abordagem não invasiva, precisa e cientificamente embasada. Utilizando o Liftera 2 (HIFU), o método atua em múltiplos níveis, integrando dois pilares fundamentais:

Eixo estrutural (Axis): restauração da sustentação tecidual por meio da contração da fáscia muscular, com efeito lifting imediato e progressivo.

Núcleo (Core): estímulo à remodelação do colágeno e à lipólise seletiva do tecido adiposo residual, redefinindo o contorno e a firmeza da pele.

Ao unir esses princípios, o CoreAxis Concept promove firmeza, simetria e harmonia corporal, representando um novo paradigma no tratamento da flacidez e da gordura localizada em pacientes após o emagrecimento acelerado.

Protocolo CoreAxis Concept



Benefícios

1. Remodelação tecidual:

Estímulo da neocolagênese e neoelastogênese.
Melhora progressiva da firmeza, elasticidade e espessura dérmica.
Redução da aparência de flacidez pós-emagrecimento.

2. Lipólise seletiva:

Ação direta sobre depósitos de gordura localizada.
Redução do volume subcutâneo, auxiliando no contorno corporal.
Efeito específico em áreas resistentes à dieta e atividade física.

3. Efeito lifting imediato e progressivo

Contração das fibras colágenas e da fáscia muscular, promovendo um efeito tensor imediato.
Resultados progressivos ao longo de 8–12 semanas, com melhora contínua da simetria e definição.

4. Reequilíbrio após uso de GLP-1/GIP

Desenvolvida especificamente para pacientes em emagrecimento acelerado, que frequentemente sofrem com flacidez e desarmonia corporal.
Restaura a autoestima e a harmonia do contorno, complementando o tratamento farmacológico.

5. Procedimento não invasivo

Sem necessidade de cortes, anestesia ou tempo de recuperação.
Retorno imediato às atividades diárias.
Alternativa segura e confortável em relação a métodos cirúrgicos.

Protocolo CoreAxis Concept



Pontos de atenção

- Sobre umbigo (sensível, menor gordura) → geralmente contorna.
- Sobre cicatrizes (p.ex. cesariana) até avaliar fibrose/aderência.
- Áreas com hérnia abdominal conhecida → contraindicado.

Descrição

É uma solução tecnológica de alta precisão, garantindo firmeza, simetria e equilíbrio corporal. Devendo ser associado com outras tecnologias como campo eletromagnético e radiofrequência. A técnica é realizada na região abdominal, utilizando o adipômetro (sempre com o paciente em pé e fazendo retração abdominal) como parâmetro para a escolha adequada da ponteira.

Delimitação da área

A área de tratamento é previamente demarcada, respeitando os limites anatômicos de segurança:

Superior → rebordo costal

Inferior → 2–3 cm acima da sínfise púbica


Laterais → espinhas ilíacas anterossuperiores / linhas médio-axilares

Centro → respeitando linha alba e evitando diretamente o umbigo

Sequência de aplicação

Inicia-se com a caneta de 10mm, em seguida utiliza-se caneta de 7mm. O protocolo é finalizado com a de 4,5mm para potencializar o efeito lifting.

Protocolo CoreAxis Concept

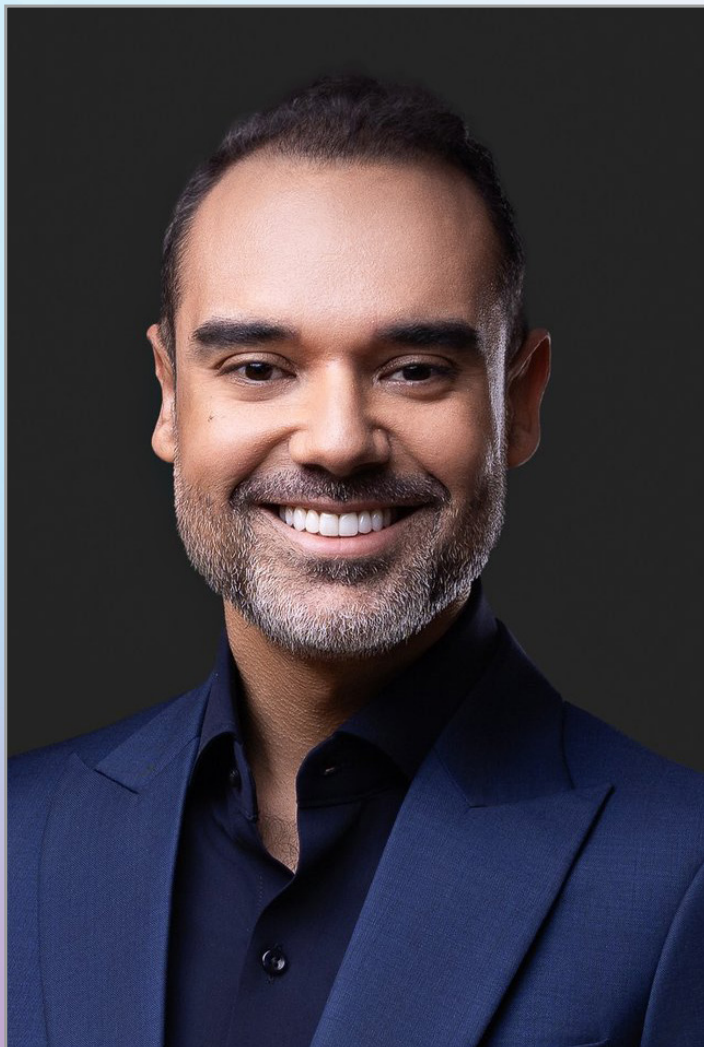


Indicações

- Tratamento da flacidez cutânea abdominal em diferentes graus.
- Lipólise seletiva de depósitos de gordura localizada resistentes a dieta e exercício.
- Redefinição do contorno corporal após emagrecimento rápido.


Perfil de Paciente:

- Pacientes contemporâneos, que fizeram tratamento farmacológico da obesidade (GLP-1/GIP) e que apresentam perda ponderal acelerada.
- Indivíduos com redução significativa de gordura corporal, mas que desenvolveram flacidez dérmica e desarmonia do contorno abdominal.
- Homens e mulheres que buscam resultados naturais, progressivos e funcionais, sem cirurgia.
- Pacientes com expectativa de do bem-estar e autoestima.

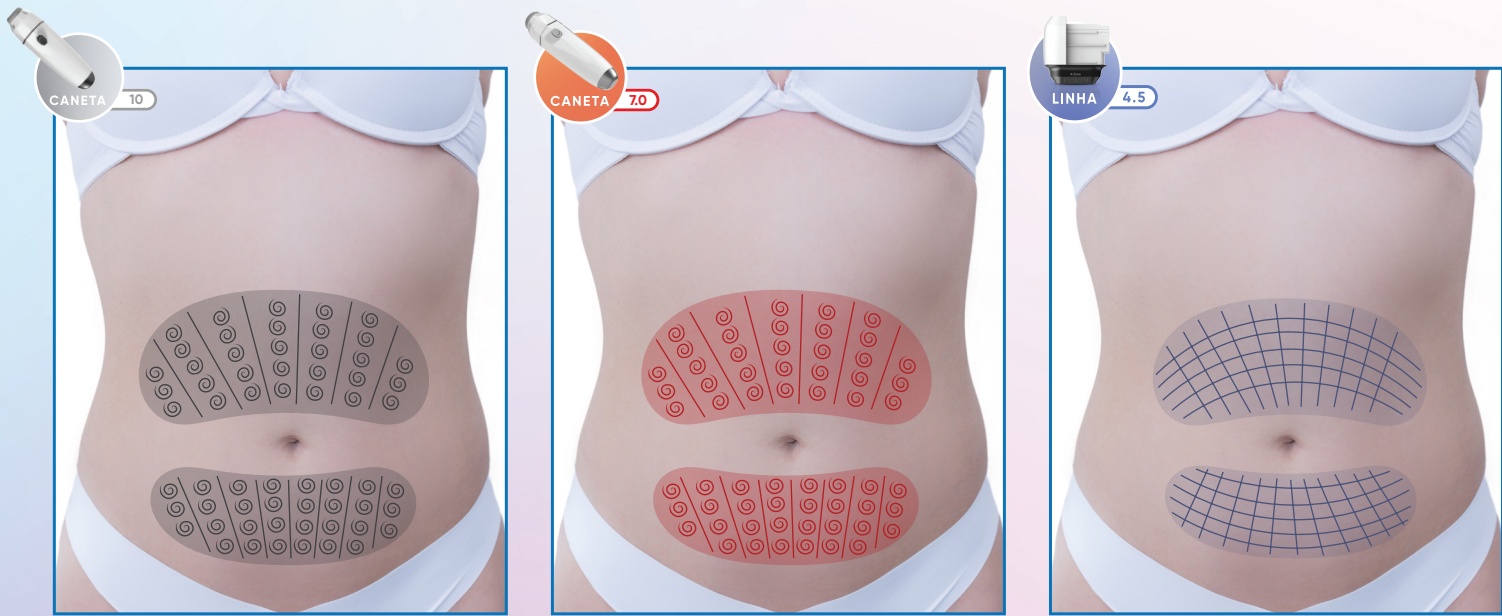

Transdutor	Região	Level	Total Linha	Total Caneta
Caneta 10	Abdômen	13-15	-	4000
Caneta 7.0	Abdômen	13-15	-	4000
Linha 4.5	Abdômen	13-15	400	-
		Total	400	8000

Signature

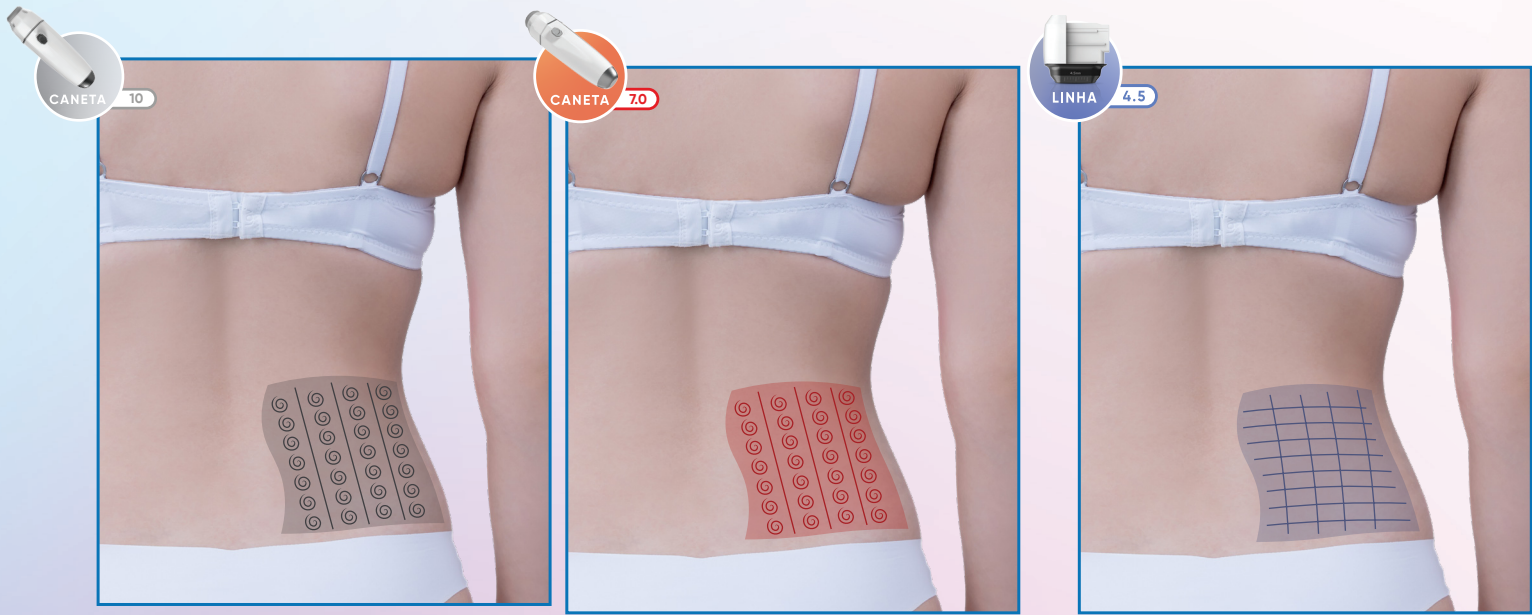

Transdutor	Região	Level	Total Linha	Total Caneta
Caneta 10	Flanco D/E	13-15	-	1000
Caneta 7.0	Flanco D/E	13-15	-	1000
Linha 4.5	Flanco D/E	13-15	100	-
		Total	100	2000