

Protocolo **Lift & Contour**



Dra. Marina Hayashida

Conceito

Lifting facial e melhora do contorno do rosto.

Descrição

Protocolo feito para “heavy faces” para melhora da sustentação e contorno.

Avaliação



Pacientes com rostos normais a pesados; não recomendado para rostos magros ou pele fina.

Benefícios


Firmeza, sustentação, definição de contornos.

Pontos de Atenção

Cuidado na região central bochecha para evitar consumo de gordura facial nesta região.

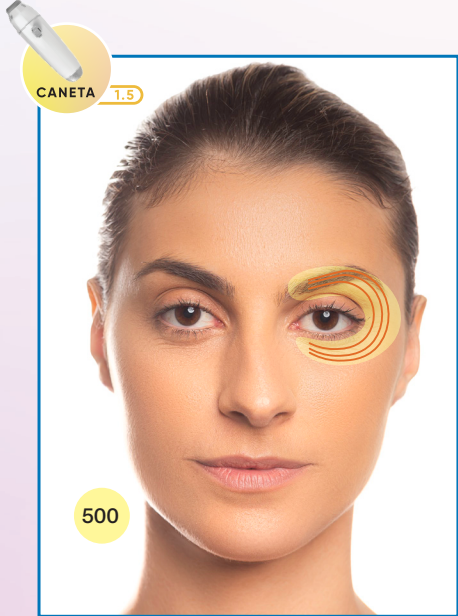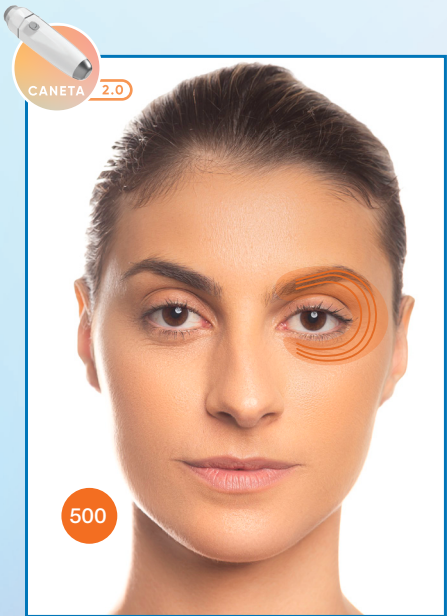

Transdutor	Região	Level	Total Caneta
Caneta 2.0	Fronte e periorbitário	4	500-1000
Caneta 1.5	Fronte e periorbitário	4	500-1000
		Total	1000-2000

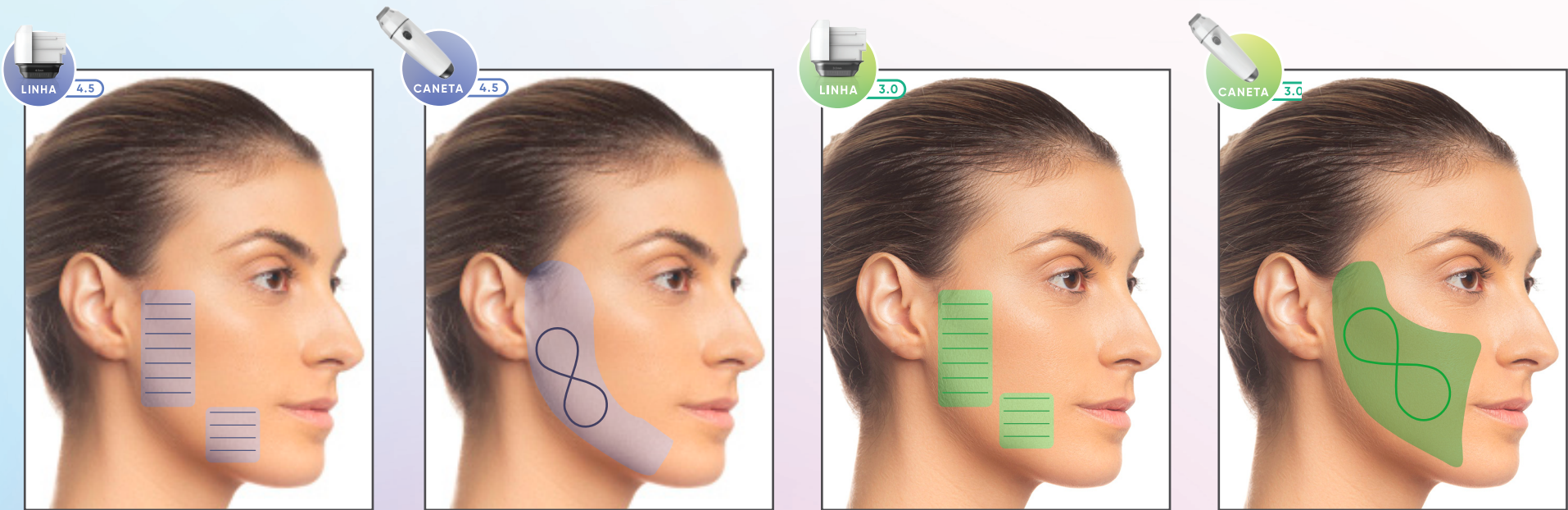

Transdutor	Região	Level	Total Linha	Total Caneta
Linha 4.5	Terço médio e inferior	10	20-40 por lado	-
Caneta 4.5	Terço médio e inferior	10	-	500-800 por lado
Linha 3.0	Terço médio e inferior	6	40-60 por lado	-
Caneta 3.0	Terço médio e inferior	6	-	500-800 por lado
		Total	60 -100	1000-1600

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Signature



Transdutor	Região	Level	Total Caneta
Caneta 2.0	Perilabial	4	250-500 por lado
Caneta 1.5	Perilabial	4	250-500 por lado
		Total	500-1000



Transdutor	Região	Level	Total Linha	Total Caneta
Caneta 7.0 (se gordura)	Submentoniano	10	-	300-600
Linha 4.5	Submentoniano Submandibular	10	20-30	-
Caneta 4.5	Submentoniano Submandibular	6	-	600-800
Linha 3.0	Submentoniano Submandibular	6	20-30	-
Caneta 3.0	Submentoniano Submandibular	6	-	600-800
		Total	40-60	1500-3200

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Signature