

Intimate Skin Quality



Assinado por:

Dr. Gustavo Peretti Rodini

Conceito: Esse protocolo foi idealizado para a melhora da qualidade de vida íntima da mulher. Pela aplicação da técnica de ultrassom macro e microfocado na região íntima há melhora da funcionalidade e da aparência da região vulvar e do monte pubiano.

Descrição: Essa aplicação foi pensada para quando a paciente apresenta queixas de flacidez, rugosidade e aparência envelhecida da região vulvar ou para quando apresenta aumento de gordura localizada em região do monte pubiano. São necessárias de 1 a 3 sessões dependendo da avaliação médica inicial. O protocolo apresentado foi desenvolvido e aplicado em paciente com impacto negativo em sua autopercepção e com consequente decréscimo de sua qualidade de vida íntima e sexual.

Intimate Skin Quality



Assinado por:

Dr. Gustavo Peretti Rodini

Avaliação: O protocolo apresentado foi desenvolvido e aplicado em paciente com impacto negativo em sua autopercepção e com consequente decréscimo de sua qualidade de vida íntima e sexual.

Benefícios: Melhora a aparência e a funcionalidade da região íntima com consequente aumento da confiança da paciente.


Pontos de atenção: Evitar aplicação sobre áreas de mucosa ou sobre a região clitoriana.



*de 3 a 4 colunas de acordo com a complexão física
*máximo 2 passadas por coluna





*de 3 a 4 colunas de acordo com a complexão física
*máximo 2 passadas por coluna

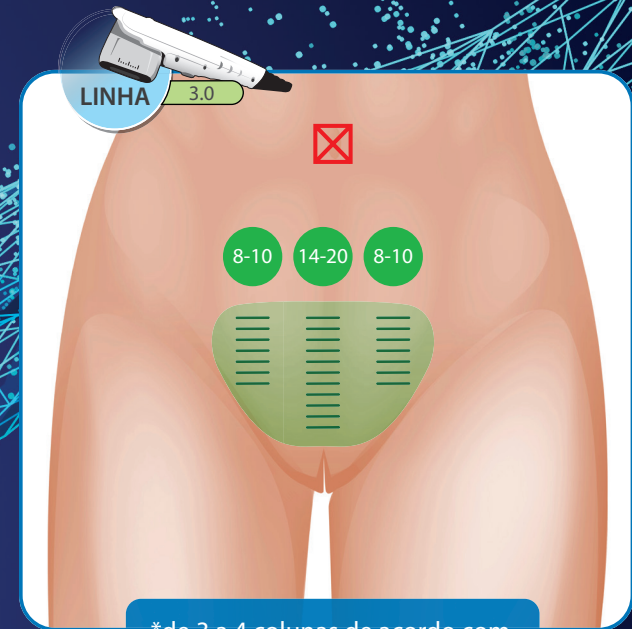

*de 3 a 4 colunas de acordo com a complexão física
*máximo 2 passadas por coluna

*Opcional - Se tiver muita gordura.




TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS
LINHA 7.0	0,9-1,1 J	26
LINHA 4.5	0,9-1,1 J	30-40
LINHA 3.0	0,6-0,7 J	30-40
TOTAL		86 - 106

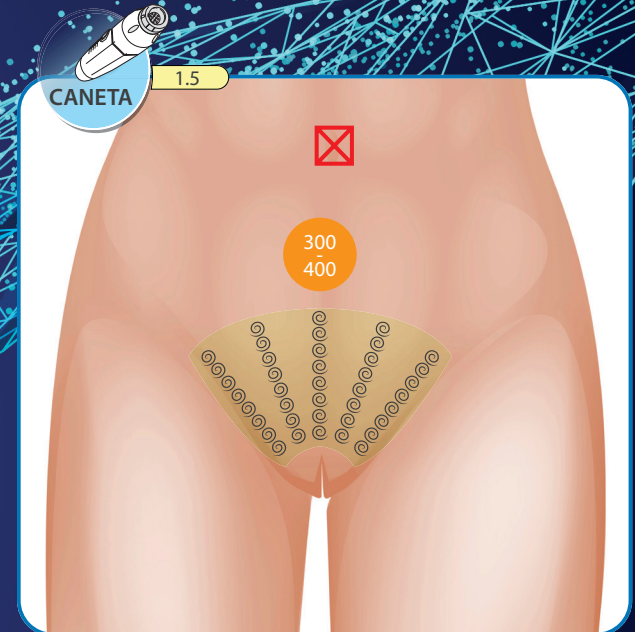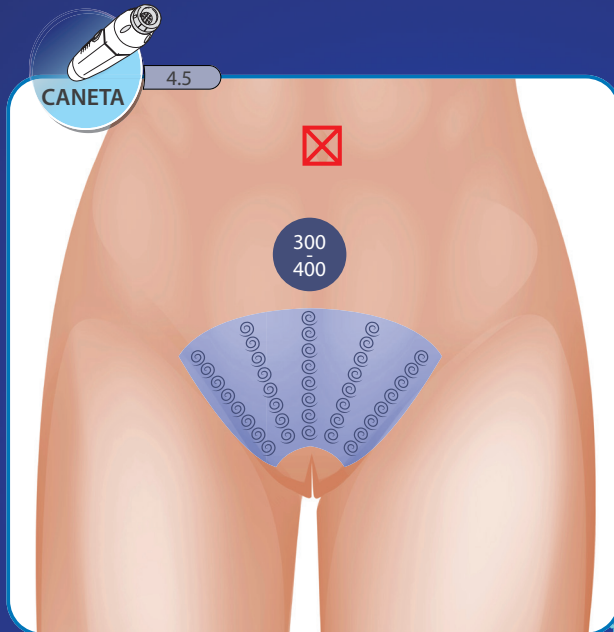

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	0,9-1,1 J	300-400
CANETA 3.0	0,6-0,7 J	300-400
CANETA 1.5	0,4-0,5 J	300-400
TOTAL		900-1200

*Opcional - Qualidade de pele.


! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

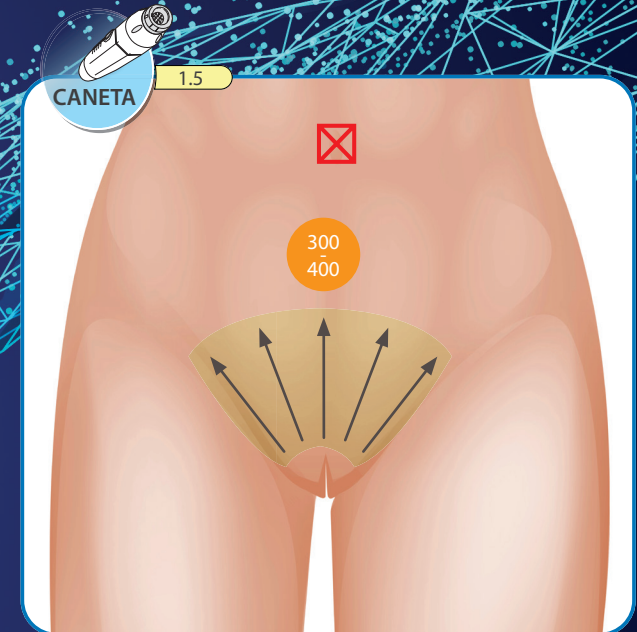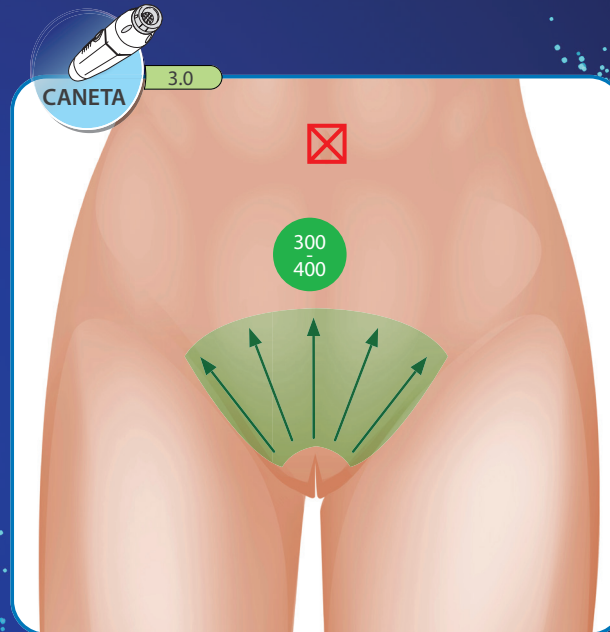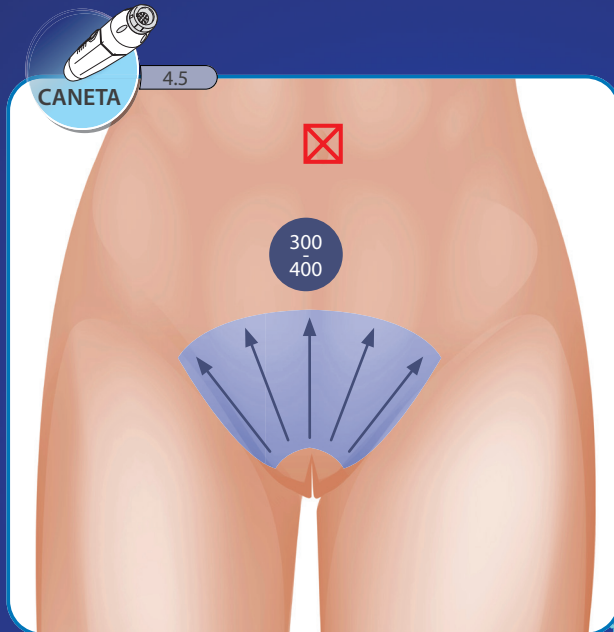

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	0,9-1,1 J	300-400
CANETA 3.0	0,6-0,7 J	300-400
CANETA 1.5	0,4-0,5 J	300-400
TOTAL		900-1200


*Opcional - Qualidade de pele.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

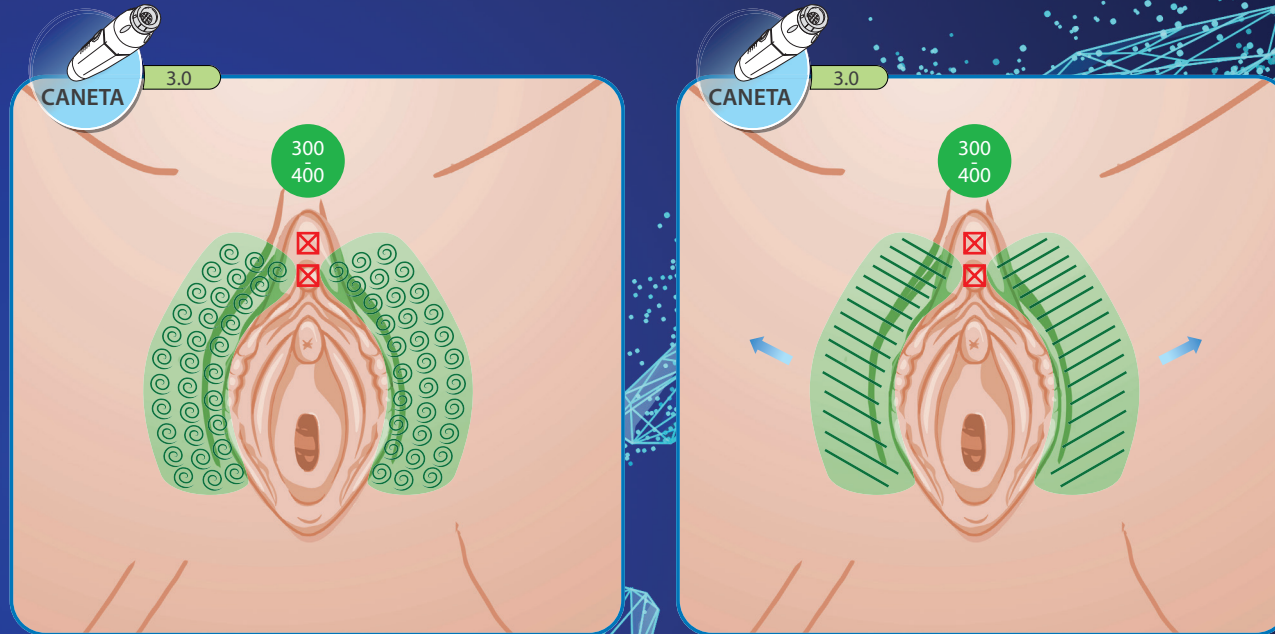

OBS: Aplico em pequeno lábio
área externa. Para flacidez/lábios
redundantes.

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,6-0,7 J	600-800

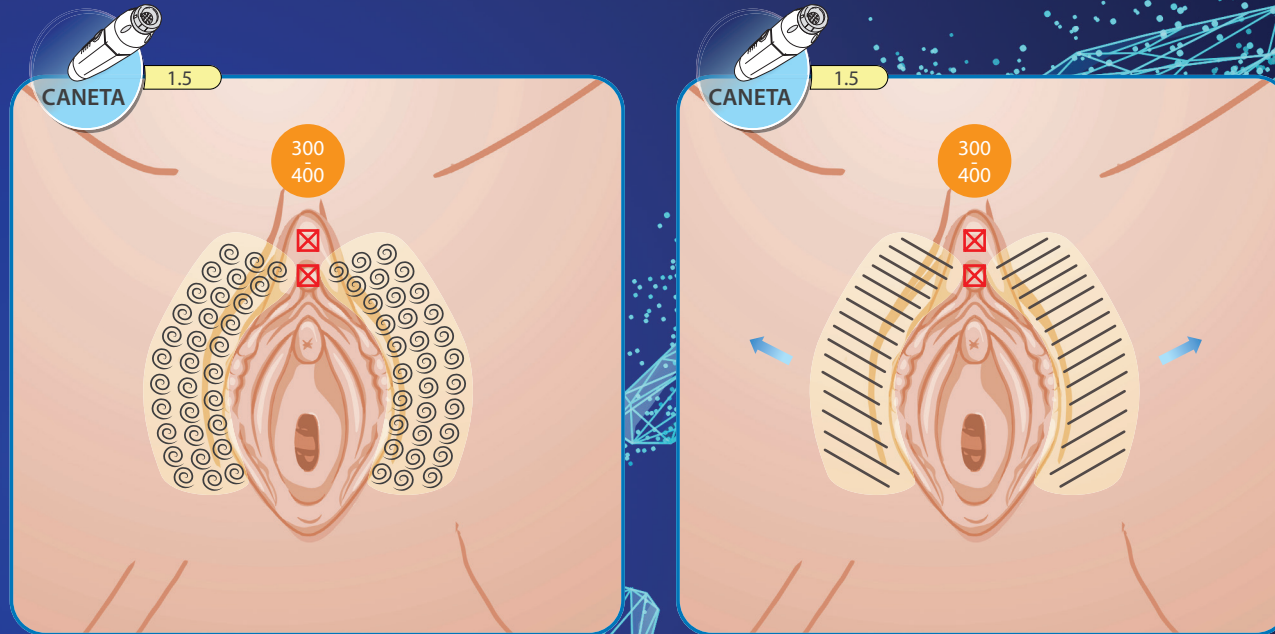

OBS: Aplico em pequeno lábio
área externa. Para flacidez/lábios
redundantes.

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 1.5	0,4-05 J	600-800